




# ID NOW<sup>™</sup> INFLUENZA A & B 2 LYNVEJLEDNING

## Nødvendige materialer til kørsel af en test:



## Instrument:

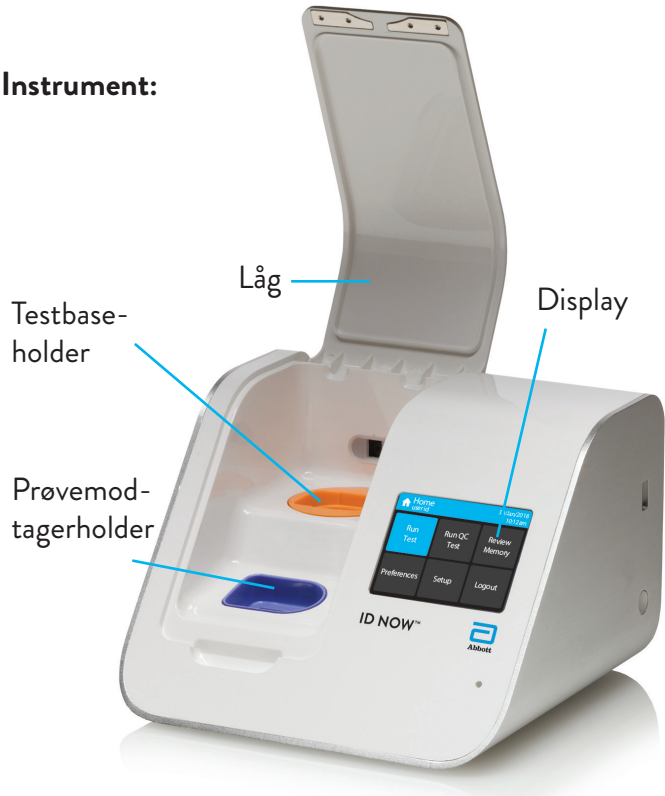

## CLIA-kompleksitet: FRITAGET

Se ID NOW Influenza A & B 2-indlægssedlen og brugervejledningen for at få fuldstændige anvisninger. Se ID NOW COVID-19 2.0-indlægssedlen for at få fuldstændige anvisninger, hvis der ønskes en sekventiel ID NOW COVID-19 2.0/ID NOW Influenza A & B 2-test med samme prøvemodtager.

## QC-TEST

Ekstern positiv og en steril podepind til negativ kontrol bør testes én gang ved hver ny forsendelse, der modtages, og én gang for hver uoplært operator.

Vælg Kør QC-test på skærmen Hjem, og følg anvisningerne på skærmen. Se Kørsel af QC-test i brugervejledningen til ID NOW Instrument for at få yderligere oplysninger.

1

Tryk på **Kør QC-test**.

2

Vælg **Influenza A og B** i menuen.

3

Vælg den **QC-test**, der skal køres.

4

Bekræft test

Tryk på **OK** for at bekræfte, at testtypen svarer til den kvalitetskontrolprøve, der skal testes, og fuldfør testen ved at følge beskederne på skærmen.

**Bemærk:** QC-testen udføres på samme måde som en patienttest med direkte næsepodning. Se den anden side for trinvisse anvisninger.

© 2024 Abbott. All rights reserved. All trademarks referenced are trademarks of either the Abbott group of companies or their respective owners.

Software © 2023 Axxin, used under license. All trademarks referenced are trademarks of their respective owners.

IN427001da Rev. 7 2024/01

## PRØVEINDSAMLING og HÅNTERING

Anvend nyindsamlkede prøver for at få optimale testresultater. Utilstrækkelig prøveindsamling eller forkert prøvehåndtering/-opbevaring/-transport kan medføre fejlagtige resultater.

## Næsepodepind

En næsepodeprobe opsamlles ved forsigtigt at indsætte podepinden i det næsebor, der løber mest, eller det næsebor, der er mest tilstoppet, hvis der ikke er synligt flåd fra podepinden dreges forsigtigt og skubbes ind, indtil der mødes modstand i niveau med næsemuslingerne (mindre end 2,5 cm inden i næseborret). Drej podepinden flere gange mod næseavæggen, og tag den derefter langsomt ud af næseborret. Puritan<sup>™</sup> Purflock<sup>™</sup> podepinde med syntetisk standardspids og Copan<sup>™</sup> podepinde med standardspids af rayon er ikke egnede til brug i denne analyse. Se indlægssedlen for at få en liste over podepinde, der er egnede til indsamling af næsepodninger.

## Næse-/svælgpodepind

En næse-/svælgpodeprobe opsamlles ved forsigtigt at indsætte podepinden i det næsebor, der løber mest, eller det næsebor, der er mest tilstoppet, hvis der ikke er synligt flåd fra podepinden lige bagud uden at vippe podepinden op eller ned. Næsepassagen løber parallelt med gulvet, ikke parallelt med næseryggen. Podepinden drejes forsigtigt og føres ind i den forreste del af næseborret parallelt med gagen og videre ind i næseavæggrummet. Lad den sidde i et par sekunder, og drej derefter langsomt podepinden, mens den trækkes tilbage.

For at sikre, at indsamlingen udføres korrekt, skal podepinden føres ind i en længe, der svarer til halvdelen af afstanden fra næsen til ørespidsen. Dette er ca. halvdelen af podepindens længde. **BRUG IKKE MAGT** under indføring af podepinden. Podepinden skal kunne bevæges jævnt med minimal modstand. Hvis der mødes modstand, trækkes podepinden lidt tilbage uden at tage den ud af næseborret. Løft derefter bagdelen af podepinden, og bevæg den fremad ind i næseavæggrummet. Puritan<sup>™</sup> Purflock<sup>™</sup> podepinde med syntetisk minispids er ikke egnede til brug i denne analyse. Se indlægssedlen for at få en liste over podepinde, der er egnede til indsamling af næse-/svælgpodninger.

## Teknisk support

Du kan få yderligere oplysninger hos distributøren eller ved at kontakte teknisk support på:

**USA**  
+1 855 731 2288  
ts.scr@abbott.com  
**EMEA**  
+44 161 483 9032  
EMEA.TechSupport@abbott.com  
**Asien og Stillehavsområdet**  
+61 7 3363 7711  
AP.TechSupport@abbott.com  
**Canada**  
+1 800 818 8335  
CANproductsupport@abbott.com  
**Europa og Mellemøsten**  
+44 161 483 9032  
EMEA.TechSupport@abbott.com  
**Latinamerika**  
+57 (601) 4824033  
LA.TechSupport@abbott.com

**Abbott Diagnostics Scarborough, Inc.**  
10 Southgate Road  
Scarborough, Maine 04074 USA  
www.globalpointofcare.abbott



www.globalpointofcare.abbott  
Only R

# ID NOW™ INFLUENZA A & B 2 LYNVEJLEDNING

Scan for at se en  
video om brug af  
ID NOW.



[www.globalpointofcare.abbott/en/support/product-installation-training/id-now-training-videos.html](http://www.globalpointofcare.abbott/en/support/product-installation-training/id-now-training-videos.html)


Se ID NOW Influenza A & B 2-indlægssedlen og brugervejledningen for at få den fuldstændige testprocedure og yderligere oplysninger, før du udfører denne test. **Bemærk:** Se afsnittet **QC-test** på bagsiden for at udføre en kvalitetstest.

Følg anvisningerne nedenfor for at udføre en patienttest.

## 1 Tag et par rene handsker på




## 2 Sådan udføres en test

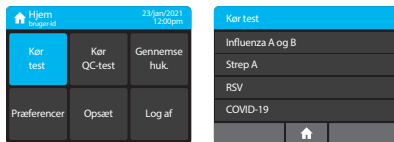

- Tryk på **Kør test**
- Vælg **Influenza A og B**
- Følg derefter anvisningerne **PÅ SKÆRMEN**

## 3 Indsæt testbase

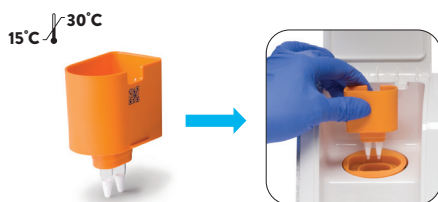


## 4 Indsæt prøvemodtager



**!** **FJERN IKKE** folieforseglingen, før du får besked om det efter 3 minutters opvarmning.

## 5

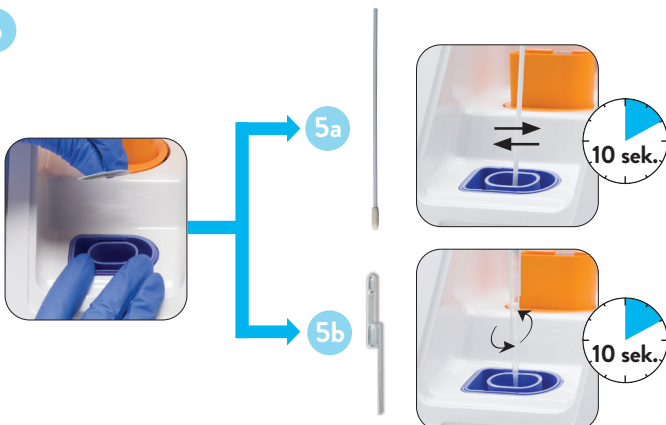


## 6 Tryk den hvide overførselskassette ind i den blå prøvemodtager



- !**
1. Tryk den hvide overførselskassette **FAST** ind i den blå prøvemodtager.
  2. Lyt efter et eller flere **KLIK**.
  3. Kontrollér, at den orange indikator er steget **HELT OP** til toppen af kassetten.

## 7 Løft og tryk overførselskassetten ind i testbasen

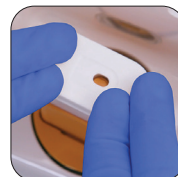

1. Tryk **FAST** ned med **BEGGE HÆNDER**.
2. Lyt efter **FLERE KLIK**.
3. Kontrollér, at den orange indikator er trykket **HELT NED**, inden der fortsættes.

## 8 KONTROL: Sørg for, at den orange indikator er helt nede



Hvis ikke, skal du **trykke ned igen**.







**Bemærk:** Hvis der ikke trykkes helt ned, kan det medføre et **UGYLDIGT** eller **FALSK** testresultat.

## 9 Luk låget for at starte testen.



## 10 Aflæsning af resultaterne

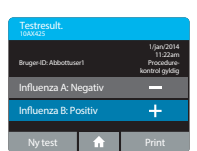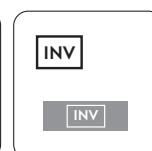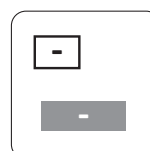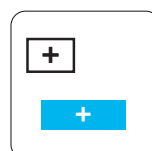

Se indlægssedlen for at få anvisninger om proceduren for en ny test i tilfælde af et dobbelt positivt eller ugyldigt testresultat for influenza A og influenza B.

## 11 Kassér brugte testemner



Se indlægssedlen for at få anvisninger om sikker håndtering og bortskaffelse af prøver og testkomponenter.

<div>Abbott ID NOW Influenza A &amp; B 2</div> <div>QRI, DA</div> <div>Size: 8.5 in x 14 in</div>	<div>Printed Colors</div> <div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>CMYK</div></div>	<div>PN: IN427001da Rev: 7</div> <div>Date of Last Revision: 7.3 2024/01/05</div>
	<div>Incoming Inspection Colors (For Reference Only)</div> <div>Colors below are not used for printing</div> <div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>PMS 2995 U Primary Blue</div><div>PMS 303 U Dark Blue</div><div>PMS 297 U Light Blue</div><div>PMS 185 U Red</div></div></div>	