



ID NOW[™] INFLUENZA A & B 2 PIKAOHJEET

Testin suorittamiseen tarvittavat materiaalit:



Testialusta



Näytesäiliö




Siirtoka-
setti



Nenänäyte-
tikku

Laite:

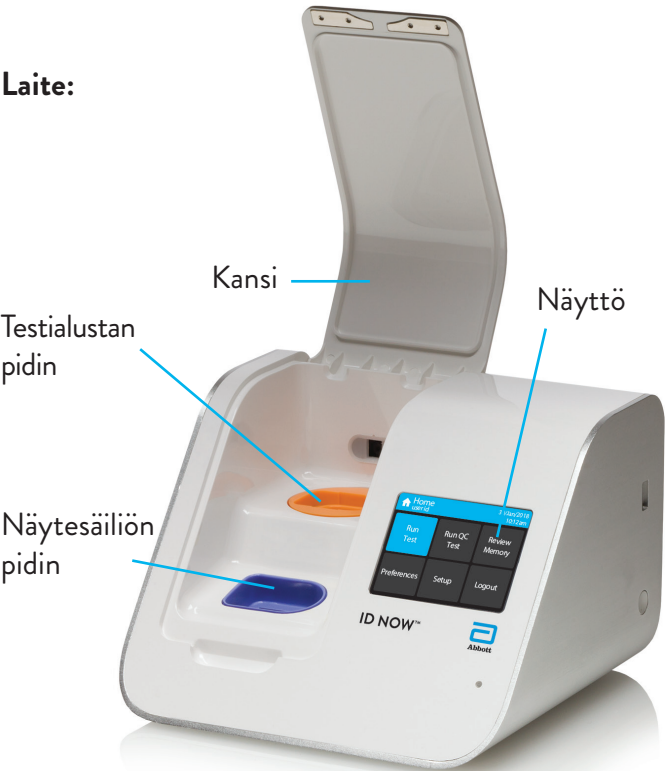




CLIA-kompleksisuus: VAPAUTETTU

Katso täydelliset ohjeet ID NOW Influenza A & B 2 -testin tuoteselosteesta ja käyttöoppaasta. Jos halutaan tehdä peräkkäin ID NOW COVID-19 2.0- ja ID NOW Influenza A & B 2 -testi samalla näytesäiliöllä, katso täydelliset ohjeet ID NOW COVID-19 2.0 -testin tuoteselosteesta.

LAADUNVALVONTATESTAUS

Ulkoinen positiivinen ja negatiivisen kontrollin steriili näytetiku on testattava kerran jokaisen uuden lähetysn vastaanoton yhteydessä ja kerran jokaisen koulututtamattoman käyttöajan kohdalla.

Laadunvalvontatestiä varten aloitusnäytetiku on valittava Tee LV-testi. Seuraa sitten näytöllä näkyviä ohjeita. Katso lisätietoja ID NOW Instrument -laitteen käyttöoppaan kohdasta Laadunvalvontatestin suorittaminen.

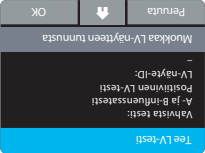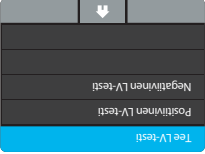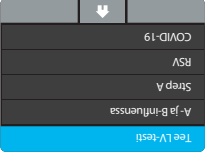

Huomautus: Laadunvalvontatesti tehdään samalla tavalla kuin suora potilaan nenästä otettu näyte. Katso vaiheittaiset ohjeet toiselta puolelta.

© 2023 Abbott. All rights reserved. All trademarks referenced are trademarks of either the Abbott group of companies or their respective owners.

Software © 2023 Axxin, used under license. All trademarks referenced are trademarks of their respective owners.

IN427001fi, Rev. 7 2023/12

NÄYTTEEN OTTAMINEN JA KÄSITTELY

Varmistetaan testin optimaalinen suorituskyky käyttämällä vasta otettuja näytteitä. Puutteellinen näytteenotto tai näytteen virheellinen käsittely/säilytys/kuljetus voi aiheuttaa virheellisiä tuloksia.

Nenänäytetiku

Ota näyte nenästä työntämällä näytetiku varovasti sieraimen, joka vuotaa näkyvämmiin, tai tukkoisempaan sieraimen, jos valuvaa limaa ei ole näkyvissä. Työnä näytetikkua nenään kevyesti pyörittäen, kunnes vastusta tuntuu nenäkuorikojen kohdalla (alle 2,5 cm: syvyydellä sieraimessa). Pyöritä näytetikkua useita kertoja nenän seinämää vasten ja poista tikku sitten hitaasti sieraimesta. Puritan™ PurFlocc™ Standard Tip Ultra Flocked Swab -nukkakuitu ja Copan™ Standard Rayon Tip Swab -raiontikut eivät sovellu käytettäväksi tämän analyysin kanssa. Katso tuoteselosteesta luettelo nenäntäytteen ottamiseen hyväksytyistä näytetikuista.

Nenänielutiku

Ota nenänielunäyte työntämällä näytetiku varovasti sieraimen, joka vuotaa näkyvämmiin, tai tukkoisempaan sieraimen, jos valuvaa limaa ei ole näkyvissä. Vie näytetikkua suoraan taakse kallistamatta näytetiku päätä ylös tai alas. Nenäkäytävä on yhdensuuntainen lattian kanssa, ei nenänselän kanssa. Työnä näytetiku kevyesti pyörittäen suulaan suuntaisesti sieraimen ja nenänielun. Jätä näytetiku paikalleen muutamaksi sekunniksi ja vedä tikku sitten pois pyörittäen sitä hitaasti. Kun näyte otetaan oikein, näytetiku vietään noin puoleenvaliin nenästä korvankäikeen ylitäviä matkaa. Se on noin puolet näytetiku pituudesta. **ÄLÄ KÄYTÄ VOIMAA**, kun työnnät näytetikkua nenään. Näytetiku pitäisi edetä tasaisesti ja vastuksen pitäisi olla hyvin vähäistä. Jos tunnet vastusta, vedä näytetikkua hieman ulospäin poistamatta sitä sieraimesta. Nosta sitten näytetiku takaosaan ja vie tikku eteenpäin nenänielun. Puritan™ PurFlocc™ Ultra Flocked Swabs-Mini Tip -nukkakuitut eivät sovellu käytettäväksi tämän analyysin kanssa. Katso tuoteselosteesta luettelo nenänielunäytteen ottamiseen hyväksytyistä näytetikuista.

Teknisen tuen neuvontalinja

Listätetöjät saat jalkailjaltasi tai ottamalla yhteyttä tekniseen tukeen:

Yhdysvallat
+1 855 731 2288
ts.scr@abbott.com
EME.TechSupport@abbott.com
+44 161 483 9032
AP.TechSupport@abbott.com
+61 7 3363 7711
CANproductsupport@abbott.com
+1 800 818 8335
EME.TechSupport@abbott.com
+44 161 483 9032

Afrikkat, Venäjä, IVY
+44 161 483 9032
EME.TechSupport@abbott.com
+57 (601) 4824033
LA.TechSupport@abbott.com

Eurooppa ja Latinalainen Amerikka
+44 161 483 9032
EME.TechSupport@abbott.com
+44 161 483 9032
EME.TechSupport@abbott.com

Abbott Diagnostics Scarborough, Inc.
10 Southgate Road
Scarborough, Maine 04074 USA
www.globalpointofcare.abbott

IVD
www.globalpointofcare.abbott

Only

ID NOW™ INFLUENZA A & B 2 PIKAOHJEET

Lue koodi ja katso
ID NOW -ohje-
video.



www.globalpointofcare.abbott/en/support/product-installation-training/id-now-training-videos.html

Lue koko testitoimenpiteen ohjeet ja lisätiedot ID NOW Influenza A & B 2 -testin tuoteselosteesta ja käyttöoppaasta ennen testin tekemistä.

Huomautus: Katso ohjeet laadunvalvontatestin tekemiseen kääntöpuolelta kohdasta **Laadunvalvontatestaus**.

Suorita potilastesti noudattamalla seuraavia ohjeita.

1 Pue puhtaat käsineet




2 Testin suorittaminen



- Paina **Tee testi** -painiketta
- Valitse **A- ja B-influenssa**
- Noudata sitten **NÄYTÖLLÄ** näkyviä ohjeita

3 Aseta testialusta

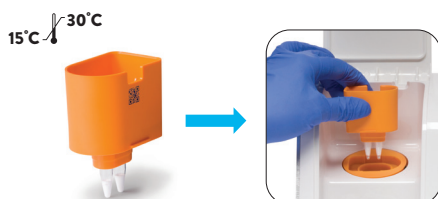


4 Aseta näytesäiliö



ÄLÄ POISTA foliosinettiä ennen ohjeistusta 3 minuutin lämmityksen jälkeen.

5

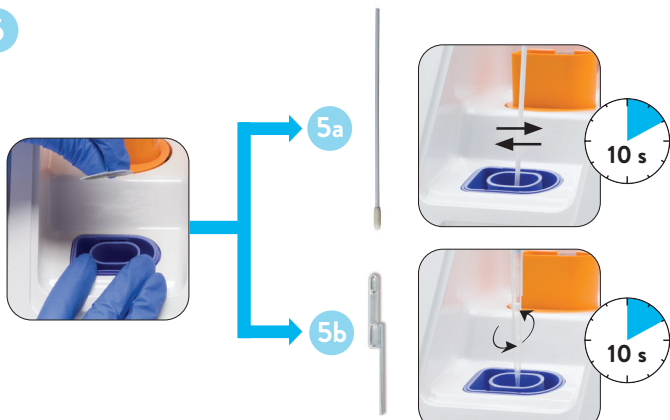


6 Paina valkoinen siirtokasetti siniseen näytesäiliöön



- 1. Paina valkoinen siirtokasetti **LUJASTI** siniseen näytesäiliöön.
- 2. Sinun pitäisi kuulla **NAPSAHDUS**.
- 3. Varmista, että oranssi osoitin on noussut **AIVAN** kasetin yläosan tasolle.

7 Nosta ja paina siirtokasetti testialustaan

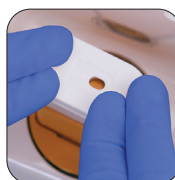

- 1. Paina **LUJASTI MOLEMMILLA KÄSILLÄ**.
- 2. Sinun pitäisi kuulla **USEITA NAPSAHDUKSIA**.
- 3. Varmista, että oranssi osoitin on **AIVAN ALHAALLA** ennen kuin jatkat.

8 TARKISTA: Varmista, että oranssi osoitin on aivan alhaalla



Jos se ei ole, **paina uudelleen**.







Huomautus: Jos kasettia ei ole painettu kunnolla alas, testitulos voi olla **EPÄKELPO** tai **VÄÄRÄ**.

9 Aloita testi sulkemalla kansi



10 Tulosten lukeminen

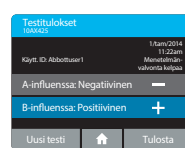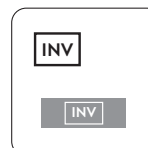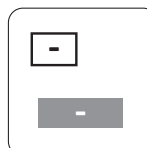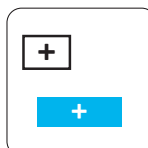

Katso ohjeet uusintatestiin tuoteselosteesta, jos testitulos on positiivinen sekä A-influenssan että B-influenssan osalta tai tulos on epäkelpo.

11 Hävitä käytetyt testiosat



Katso tuoteselosteesta ohjeet näytteiden ja testikomponenttien turvalliseen käsittelyyn ja hävittämiseen.

