

Abbott Diagnostics Scarborough, Inc.
 10 Southgate Road
 Scarborough, Maine 04074 USA
 www.globalpointofcare.abbott

Amérique latine
Europe et Moyen-Orient
Canada
Asie-Pacifique
Afrique, Russie, CEI
Etats-Unis

+1 855 731 2288
 +44 161 483 9032
 +61 7 3363 7711
 +1 800 818 8335
 +44 161 483 9032
 +57 (601) 4824033

ts.scr@abbott.com
 EME.TechSupport@abbott.com
 AP.TechSupport@abbott.com
 CANproductsupport@abbott.com
 EME.TechSupport@abbott.com
 LA.TechSupport@abbott.com

Pour plus d'informations, contacter le distributeur ou l'assistance technique aux coordonnées suivantes :

Assistance technique par téléphone

produit pour connaître la liste des écouvillons acceptables pour le prélèvement rhinopharyngien. filée à mini embout Puritan™ Purflock™ ne sont pas adaptés à ce test. Consulter la notice du arrière de l'écouvillon et le faire avancer à nouveau dans le rhinopharynx. Les écouvillons en fibre est rencontrée, retirer légèrement l'écouvillon sans le sortir de la narine, puis soulever la partie pouvoir progresser en douceur sans rencontrer de résistance importante. Si une résistance longueur de l'écouvillon. **NE PAS FORCER** lors de l'insertion de l'écouvillon. L'écouvillon doit et l'extrémité de l'oreille. Cette distance correspond approximativement à la moitié de la Pour garantir un prélèvement adéquat, l'écouvillon doit être inséré à mi-chemin entre le nez en place pendant quelques secondes, puis retirer l'écouvillon en le faisant tourner lentement. tourner doucement, parallèlement au palais. Avancer l'écouvillon dans le rhinopharynx, le laisser plancher nasal et non à l'arrêt du nez. Insérer l'écouvillon dans la narine externe en le faisant l'arrière, sans incliner l'écouvillon vers le haut ou vers le bas. Les voies nasales sont parallèles au congestionnée si aucun écoulement n'est visible. Faire passer directement l'écouvillon vers l'écouvillon dans la narine présentant l'écoulement le plus visible ou dans la narine la plus Pour pratiquer un prélèvement rhinopharyngien à l'aide d'un écouvillon, insérer doucement l'écouvillon rhinopharyngien

produit pour connaître la liste des écouvillons acceptables pour le prélèvement nasal. écouvillons à embout standard Copan™ ne sont pas adaptés à ce test. Consulter la notice du de la narine. Les écouvillons en fibre filée à embout standard Puritan™ Purflock™ et les narine). Faire tourner l'écouvillon plusieurs fois contre la paroi nasale, puis le retirer lentement résistance soit rencontrée au niveau des cornets (moins d'un pouce après l'entrée dans la narine présentant l'écoulement le plus visible. Enfoncer l'écouvillon en le tournant délicatement jusqu'à ce qu'une écoulement n'est visible. Enfoncer l'écouvillon en le tournant délicatement jusqu'à ce qu'une la narine présentant l'écoulement le plus visible ou la narine la plus congestionnée si aucun Pour recueillir un échantillon par écouvillon nasal, insérer avec précaution l'écouvillon dans l'écouvillon nasal

Utiliser des échantillons fraîchement prélevés pour des résultats optimaux. Si l'échantillon n'a pas été correctement prélevé, manipulé, stocké ou transporté, le résultat du test peut être erroné.

PRÉLÈVEMENT et MANIPULATION des ÉCHANTILLONS

© 2023 Abbott. All rights reserved. All trademarks referenced are trademarks of either the Abbott group of companies or their respective owners.

Software © 2023 Axxin, used under license. All trademarks referenced are trademarks of their respective owners.

IN427001fr Rev. 7 2023/12

TESTS CQ

Un écouvillon positif externe et un écouvillon stérile pour un contrôle négatif doivent être testés une fois avec chaque nouveau lot reçu et une fois pour chaque opérateur qui n'a pas encore été formé.

Pour le test CQ, sélectionner Lancer test CQ sur l'écran d'accueil et suivre les instructions affichées à l'écran. Pour plus de détails, se reporter à la section Lancement du test CQ dans le manuel d'utilisation de l'ID NOW Instrument.

1 Appuyer sur **Lancer test CQ**.

2 Sélectionner **Gripes A et B** dans le menu.

3 Sélectionner le test CQ à lancer.

4 Confirmer le test.

l'échantillon CQ devant être analysé en appuyant sur **OK** et en suivant les invites à l'écran pour réaliser l'analyse.

Remarque : le test CQ est lancé de la même manière qu'un test patient par écouvillonage nasal direct. Voir au verso pour des instructions détaillées.

ID NOW™
INFLUENZA A & B 2
INSTRUCTIONS DE RÉFÉRENCE RAPIDE

Matériel requis pour lancer un test :

Base de test

Récepteur d'échantillon

Cartouche de transfert

Écouvillon nasal

Instrument :

Affichage

Couvercle

Support de la base de test

Support récepteur d'échantillon

Complexité CLIA : DISPENSÉ

Se reporter au manuel d'utilisation et à la notice du produit ID NOW Influenza A & B 2 pour des instructions complètes. S'il est nécessaire de réaliser un test séquentiel ID NOW COVID-19 2.0 / ID NOW Influenza A et B 2 avec le même récepteur d'échantillon, se reporter à la notice du produit ID NOW COVID-19 2.0 pour des instructions complètes.

ID NOW™ INFLUENZA A & B 2 INSTRUCTIONS DE RÉFÉRENCE RAPIDE

Scanner le QR code
pour regarder la vidéo
d'utilisation d'ID NOW.



www.globalpointofcare.abbott/en/support/product-installation-training/id-now-training-videos.html


Avant de réaliser ce test, se reporter au manuel d'utilisation et à la notice du produit ID NOW Influenza A & B 2 pour connaître la réalisation complète du test et obtenir des informations supplémentaires. **Remarque :** pour réaliser un test de qualité, se reporter à la section **Tests CQ** au verso de ce document.

Pour réaliser un test patient, suivre les instructions ci-dessous.

1 Enfiler une paire de gants propres




2 Pour réaliser un test

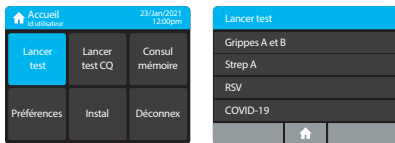

- Appuyer sur **Lancer test**
- Sélectionner **Gripes A et B**
- Suivre ensuite les instructions **À L'ÉCRAN**

3 Insérer la base de test

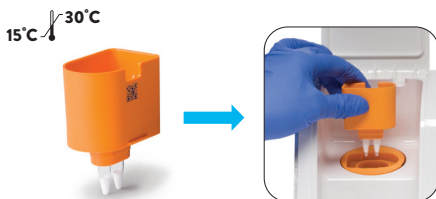


4 Insérer le récepteur d'échantillon



NE PAS RETIRER le film en aluminium tant qu'aucune instruction n'invite à le faire, 3 minutes après le préchauffage.

5

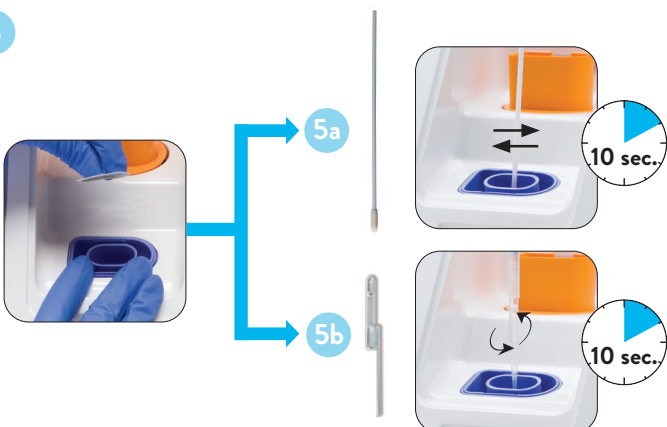


6 Insérer la cartouche de transfert blanche dans le récepteur d'échantillon bleu



1. Insérer **FERMEMENT** la cartouche de transfert blanche dans le récepteur d'échantillon bleu.
2. L'insertion doit déclencher un **CLIC**.
3. Vérifier que l'indicateur orange est **COMPLÈTEMENT** remonté jusqu'au dessus de la cartouche.

7 Insérer la cartouche de transfert dans la base de test

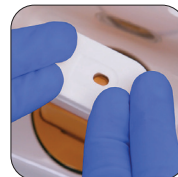

IMPORTANT !

1. Appuyer **FERMEMENT** avec les **DEUX MAINS**.
2. L'insertion doit déclencher **PLUSIEURS CLICS**.
3. Vérifier que l'indicateur orange est **COMPLÈTEMENT RENTRÉ** avant de continuer.

8 VÉRIFICATION : s'assurer que l'indicateur orange est complètement rentré



Si ce n'est pas le cas, **appuyer de nouveau dessus**.







Remarque : si l'indicateur n'est pas complètement enfoncé, un résultat de test **INVALIDE** ou **FAUX** risque d'être généré.

9 Fermer le couvercle pour commencer le test



10 Lecture des résultats

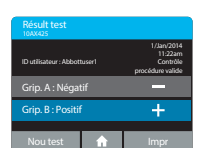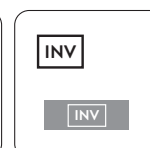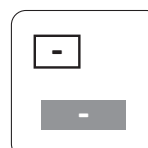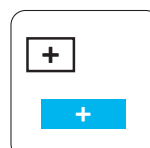

Se reporter aux instructions de la notice du produit pour connaître la procédure de réalisation d'un nouveau test si le résultat du test est positif ou invalide pour Grip. A et Grip. B.

11 Mettre au rebut les composants du test usagés



Se reporter à la notice pour obtenir des instructions sur la manipulation et la mise au rebut en toute sécurité des échantillons et des composants du test.

