




ID NOW[™] INFLUENZA A & B 2

ISTRUZIONI DI RIFERIMENTO RAPIDO

Materiali necessari per eseguire un test:



Strumento:

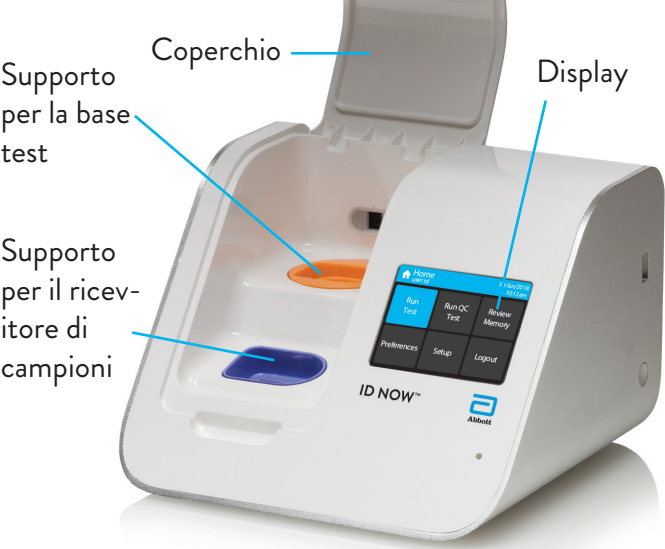

Complessità CLIA: ESENTE

Per le istruzioni complete fare riferimento al manuale d'uso e al foglio illustrativo di ID NOW Influenza A & B 2. Se si desidera un test sequenziale ID NOW COVID-19 2.0/ID NOW Influenza A & B 2 utilizzando lo stesso ricevitore campioni, fare riferimento al foglio illustrativo di ID NOW COVID-19 2.0 per le istruzioni complete.

PRELIEVO e MANIPOLAZIONE dei CAMPIONI

Per prestazioni ottimali dei test, utilizzare campioni appena prelevati. Un prelievo inadeguato o la manipolazione/conservazione/trasporto inappropriati del campione possono provocare risultati erranei.

Tampone nasale

Per raccogliere un campione da tampone nasale, inserire delicatamente il tampone

nella narice che presenta il maggior drenaggio oppure in quella più congestionata se

non è visibile alcun drenaggio. Ruotando delicatamente, spingere il tampone finché non

si avverte resistenza al livello dei turbinati (meno di un pollice all'interno della narice).

Ruotare il tampone diverse volte contro la parete nasale, quindi estrarlo lentamente dalla

narice. I tamponi ultra floccati con punta standard Puritan[™] Purflock[™] e i tamponi con

punta standard in rayon Copan[™] non sono adatti per l'uso in questa analisi. Consultare il

foglio illustrativo per gli elenchi dei tamponi accettabili per il prelievo di tamponi nasali.

Tampone nasofaringeo

Per raccogliere un campione da tampone nasofaringeo, inserire delicatamente il tampone

nella narice che presenta il maggior drenaggio oppure in quella più congestionata se

è visibile alcun drenaggio. Portare direttamente il tampone indietro senza inclinarlo verso

l'alto o verso il basso. Il condotto nasale è parallelo al pavimento, non al ponte nasale.

Ruotando delicatamente, inserire il tampone nella narice anteriore parallela al palato

facendolo avanzare nella nasofaringe, tenerlo fermo per qualche secondo, quindi ruotarlo

delicatamente durante l'estrazione.

Ai fini di un prelievo corretto, il tampone deve essere collocato a una distanza media tra

il naso e la punta dell'orecchio, ovvero circa la metà della sua lunghezza. **NON USARE**

FORZA durante l'inserimento del tampone. Il tampone deve muoversi agevolmente

con una resistenza minima; se si incontra resistenza, ritrarre un minimo il tampone senza

rimuoverlo dalla narice. Quindi, sollevare la parte posteriore del tampone e farlo avanzare

nella nasofaringe. I tamponi ultra floccati con punta mini Puritan[™] Purflock[™] non sono

adatti per l'uso in questa analisi. Consultare il foglio illustrativo per gli elenchi dei tamponi

accettabili per il prelievo di tamponi nasofaringei.

Assistenza tecnica telefonica

È possibile ricevere maggiori informazioni dal proprio distributore oppure contattando

l'assistenza tecnica ai seguenti recapiti:

Stati Uniti	+1 855 731 2288
Africa, Russia, CSI	+44 161 483 9032
Asia Pacifico	+61 7 3363 7711
Canada	+1 800 818 8335
Europa e Medio Oriente	+44 161 483 9032
América Latina	+57 (601) 4824033

Abbott Diagnostics Scarborough, Inc.
10 Southgate Road
Scarborough, Maine 04074 USA
www.globalpointofcare.abbott



Only B

TEST CQ


Il tampone esterno positivo e un tampone sterile per il controllo negativo devono essere analizzati una volta per ogni nuova spedizione ricevuta e una volta per ogni operatore non addestrato.

Per i test CQ, selezionare Esegui CQ sulla schermata Home e seguire le istruzioni! visualizzate. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla sezione relativa all'esecuzione di un test CQ nel manuale d'uso dello ID NOW Instrument.


1 Premere Esegui CQ.



2 Selezionare Influenza A & B dal menu.

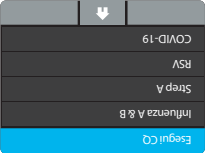


3 Selezionare il test CQ da eseguire.

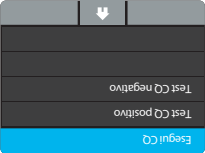

4 Confermare il test.

Confermare il tipo di test per abbinare il campione CQ previsto per il test toccando **OK** e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare l'analisi.

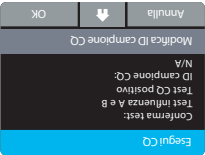

Nota: il test CQ viene eseguito nello stesso modo di un test paziente su tampone nasale diretto. Per le istruzioni dettagliate fare riferimento all'altro lato.

© 2023 Abbott. All rights reserved. All trademarks referenced are trademarks of either the Abbott group of companies or their respective owners.
Software © 2023 Axxin, used under license. All trademarks referenced are trademarks of their respective owners.

IN427001it Rev. 7 2023/12

ID NOW™

INFLUENZA A & B 2

ISTRUZIONI DI RIFERIMENTO RAPIDO

Eseguire la scansione per guardare il video di istruzioni di ID NOW.



www.globalpointofcare.abbott/en/support/product-installation-training/id-now-training-videos.html


Per la procedura di analisi completa e ulteriori informazioni, prima di eseguire questo test fare riferimento al manuale d'uso e al foglio illustrativo di ID NOW Influenza A & B 2. **Nota:** per eseguire un test sulla qualità, fare riferimento alla sezione **Test CQ** sul retro.

Per eseguire un test su un paziente, seguire le istruzioni riportate di seguito.

1 Indossare un paio di guanti puliti.




2 Per eseguire un test

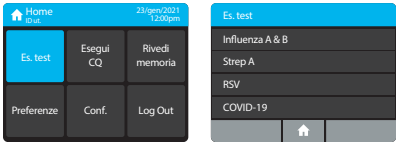

- Premere **Es. test**.
- Selezionare **Influenza A & B**.
- Quindi seguire le istruzioni **SU SCHERMO**.

3 Inserire la base test.

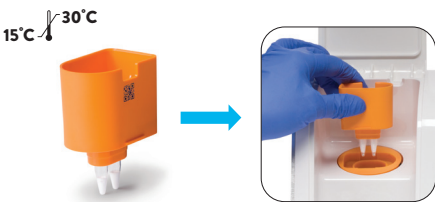


4 Inserire il ricevitore di campioni.



NON RIMUOVERE il sigillo in alluminio finché non viene indicato dopo 3 minuti di riscaldamento.

5

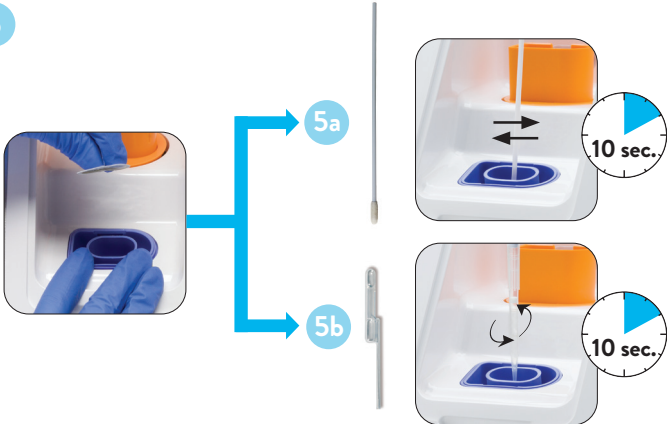


6 Premere la cartuccia di trasferimento bianca nel ricevitore di campioni blu.



- 1. Premere **SALDAMENTE** la cartuccia di trasferimento bianca nel ricevitore di campioni blu.
- 2. Assicurarsi di udire dei **CLIC**.
- 3. Confermare che l'indicatore arancione si sia alzato **COMPLETAMENTE** fino alla parte superiore della cartuccia.

7 Sollevare e premere la cartuccia di trasferimento nella base test.

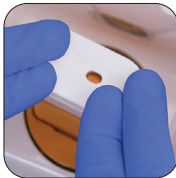

IMPORTANTE!

- 1. Premere **SALDAMENTE** verso il basso con **ENTRAMBE LE MANI**.
- 2. Assicurarsi di udire **PIÙ CLIC**.
- 3. Confermare che l'indicatore arancione sia **COMPLETAMENTE ABBASSATO** prima di continuare.

8 **CONTROLLO:** assicurarsi che l'indicatore arancione sia completamente abbassato.



Altrimenti, **premere nuovamente verso il basso**.







Nota: se non si preme completamente verso il basso, i risultati del test potrebbero essere **NON VALIDI** o **FALSI**.

9 Chiudere il coperchio per avviare il test.




10 Leggere i risultati

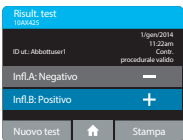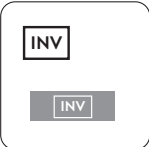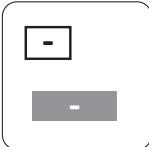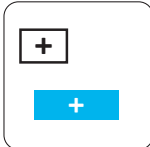

In caso di risultato del test duplice di influenza A e B positivo o non valido, per la procedura di ripetizione del test fare riferimento alle istruzioni del foglio illustrativo.

11 Smaltire i pezzi del test usati.

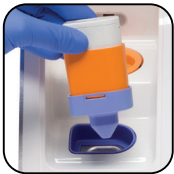

Per le istruzioni sulla gestione e sullo smaltimento in sicurezza dei campioni e dei componenti del test, fare riferimento al foglio illustrativo.

<div>Abbott</div> <div>ID NOW</div> <div>Influenza A & B 2</div> <div></div> <div>QRI, IT</div> <div></div> <div>Size:</div> <div>8.5 in x 14 in</div>	<div>Printed Colors</div> <div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>CMYK</div></div>	<div>PN: IN427001it</div> <div>Rev: 7</div> <div></div> <div></div> <div>Date of Last Revision:</div> <div>7.2 2023/12/20</div>
	<div>Incoming Inspection Colors</div> <div>(For Reference Only)</div> <div>Colors below are not used for printing</div> <div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>PMS 2995 U</div><div>Primary Blue</div><div>PMS 303 U</div><div>Dark Blue</div><div>PMS 297 U</div><div>Light Blue</div><div>PMS 185 U</div><div>Red</div></div></div>	