

VERZAMELEN EN BEHANDELEN VAN SPECIMEN

Gebruik vers verzamelde specimen's voor optimale testprestaties. Onjuiste afname of onjuiste behandelings/bewaring/transport van specimen's kan foutieve resultaten opleveren.

Neusuitstrijkje

Om een monster van een neusuitstrijkje te nemen, brengt u het staafje

voorzichtig in het neusgat met de meest zichtbare drainage in, of in het neusgat

met de meeste verstopping als de drainage niet zichtbaar is. Duw het staafje

voorzichtig rond totdat u weerstand ondervindt ter hoogte van de neusschelpen

(minder dan 2,5 cm in het neusgat). Draai het staafje verschillende keren tegen

de neuswand en verwijder het langzaam uit het neusgat. Puritan™ PurFloek™

Standard Tip Ultra Flocked Swabs en Copan™ Standard Rayon Tip Swabs zijn

niet geschikt voor gebruik in deze test. Raadpleeg de productbijsluiters voor een

lijst met aanvaardbare staafjes voor het afnemen van neusuitstrijkjes.

Nasofarynxuitstrijkje

Om een monster van een nasofaryngeaal uitstrijkje te nemen, brengt u het

staafje voorzichtig in het neusgat met de meest zichtbare drainage in, of in het

neusgat met de meeste verstopping als de drainage niet zichtbaar is. Steek het

staafje direct naar achteren zonder de kop van het staafje omhoog of omlaag te

kantelen. De neusholte loopt parallel aan de vloer, niet parallel aan de neusbog.

Breng het staafje voorzichtig draaiend in de voorste neusholte, parallel aan het

gehemelte, en schuif het staafje de neusholte in, laat het een paar seconden

zitten en draai het staafje dan langzaam terwijl het wordt teruggetrokken.

Om zeker te zijn van een goede afname moet het staafje over een afstand

worden bewogen die de helft is van de afstand van de neus tot de punt van het

oor. Dit is ongeveer de helft van de lengte van het staafje. **GEBRUIK GEEN**

KRACHT terwijl u het staafje inbrengt. Het staafje moet soepel bewegen met

minimale weerstand. Als u weerstand ondervindt, trekt u het staafje een stukje

terug zonder het uit het neusgat te halen. Til dan de achterkant van het staafje

op en beweeg het naar voren in de nasofarynx. Puritan™ PurFloek™ Ultra

Flocked Swabs-Mini Tip zijn niet geschikt voor gebruik in deze test. Raadpleeg

de productbijsluiters voor een lijst met aanvaardbare staafjes voor nasofaryngeale

uitstrijkjes.

Advieslijn voor technische ondersteuning

Meer informatie is verkrijgbaar bij de distributeur of door contact op te nemen met Technische Ondersteuning op:

VS +1 855 731 2288 ts.scr@abbott.com
Afrika, Rusland, GOS +44 161 483 9032 EME.TechSupport@abbott.com
Azië en de Stille Oceaan +61 7 3363 7711 AP.TechSupport@abbott.com
Canada +1 800 818 8335 CANproductsupport@abbott.com
Europa en Midden-Oosten +44 161 483 9032 EME.TechSupport@abbott.com
Latijns-Amerika +57 (601) 4824033 LA.TechSupport@abbott.com

Abbott Diagnostics Scarborough, Inc.
10 Southgate Road
Scarborough, Maine 04074 USA
www.globalpointofcare.abbott



Ro Only

QC-TESTEN


Uitwendig positief en een steriel wattenstaafje voor negatieve controle moeten één keer worden getest bij elke nieuwe zending die wordt ontvangen en één keer voor elke ongetrainde operator.

Voor QC-tests selecteert u 'QC-test uitv.' op het startscherm en volgt u de weergegeven instructies. Raadpleeg Het uitvoeren van een QC-test in de gebruikershandleiding van het ID NOW Instrument voor meer informatie.


1 Druk op QC-test uitv.



2 Selecteer Griep A & B in het menu.

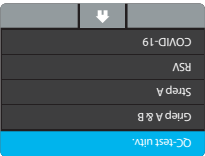


3 Selecteer de QC-test die moet worden uitgevoerd.

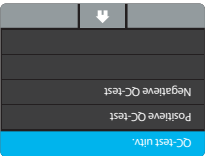

4 Test bevestigen

Bevestig dat het testtype overeenkomt met het QC-monster dat u wilt testen door te drukken op **OK** en de aanwijzingen op het scherm te volgen om het testen te voltooien.

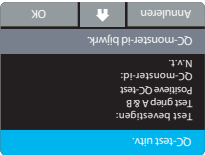

© 2024 Abbott. All rights reserved. All trademarks referenced are trademarks of either the Abbott group of companies or their respective owners.

Software © 2023 Axxin, used under license. All trademarks referenced are trademarks of their respective owners.


IN427001nl Rev. 7 2024/01



ID NOW™
INFLUENZA A & B 2
SNELLE REFERENTIE-INSTRUCTIES

Benodigde materialen om een test uit te voeren:

Instrument:

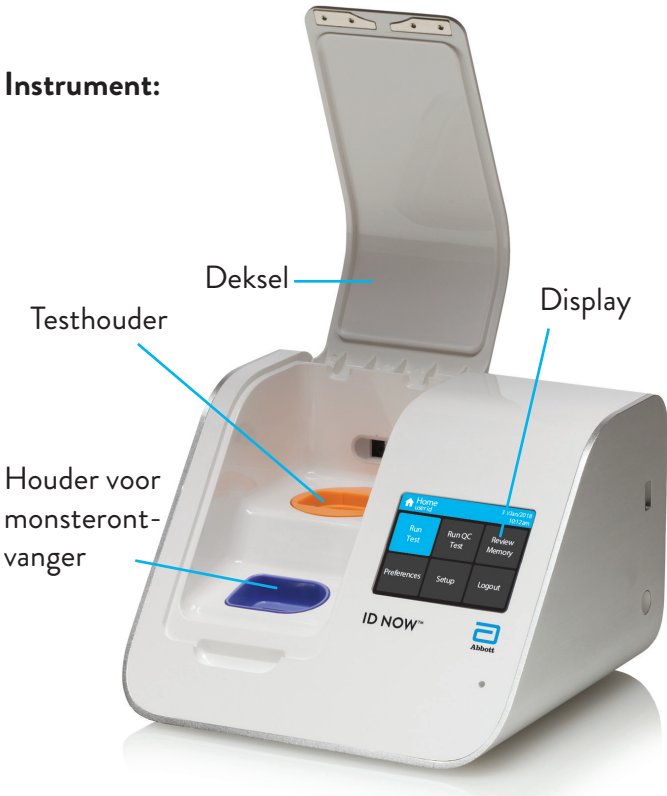

CLIA-complexiteit: UITGESTELD

Raadpleeg de productbijsluiters en gebruikershandleiding van ID NOW Influenza A & B 2 voor volledige instructies. Als een opeenvolgende ID NOW COVID-19 2.0 / ID NOW Influenza A & B 2-test met dezelfde monsterontvanger gewenst is, raadpleeg dan de ID NOW COVID-19 2.0 productbijsluiters voor volledige instructies.

ID NOW™ INFLUENZA A & B 2 SNELLE REFERENTIE-INSTRUCTIES

Scan om de ID NOW
instructievideo te
bekijken.



www.globalpointofcare.abbott/en/support/product-installation-training/id-now-training-videos.html

Raadpleeg voordat u deze test uitvoert de productbijsluiter en gebruikershandleiding van het ID NOW Influenza A & B 2 voor de volledige testprocedure en aanvullende informatie. **Opmerking:** Raadpleeg het gedeelte **QC-testen** op de achterkant om een kwaliteitstest uit te voeren.

Volg onderstaande aanwijzingen om een patiënttest uit te voeren.

1 Trek een schoon paar handschoenen aan




2 Een test uitvoeren



- Druk op **Test uitv.**
- Selecteer **Griep A & B**
- Volg vervolgens de instructies **OP HET SCHERM**

3 Testbasis plaatsen

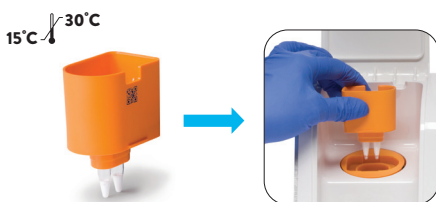


4 De monsterontvanger plaatsen



VERWIJDER de folieverzegeling **NIET** totdat dit na 3 minuten opwarmen wordt aangegeven.

5

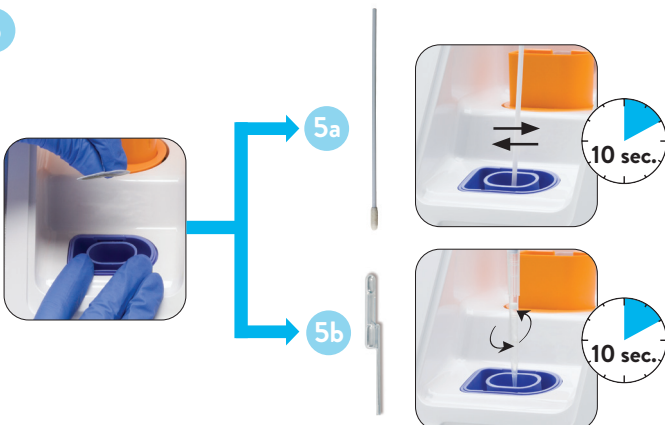


6 Druk de witte overdrachtspatroon in de blauwe monsterontvanger



1. Druk **STEVI**G op de witte overdrachtspatroon in de blauwe monsterontvanger.
2. Luister of u **KLIK(KEN)** hoort.
3. Controleer of de oranje indicator **VOLLEDIG** naar de bovenkant van de patroon is gestegen.

7 Til de overdrachtspatroon op en druk deze in de testbasis

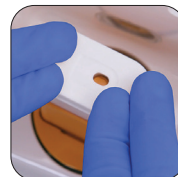

! BELANGRIJK!

1. Druk **STEVI**G omlaag met **BEIDE HANDEN**.
2. Luister of u **MEERDERE KLIKKEN** hoort.
3. Controleer of de oranje indicator **VOLLEDIG OMLAAG** is voordat u doorgaat.

8 **CONTROLE:** Zorg ervoor dat de oranje indicator volledig omlaag staat



Als dit niet het geval is, **druk dan nogmaals omlaag.**







Opmerking: Als u niet volledig indrukt, kan dit een **ONGELDIG** of **FOUTIEF** testresultaat veroorzaken.

9 Sluit het deksel om de test te starten



10 De resultaten aflezen

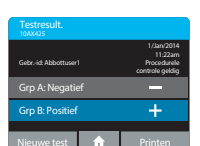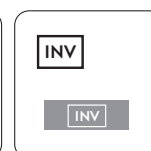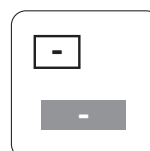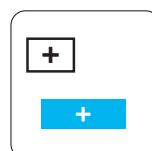






Raadpleeg de instructies op de productbijsluiter voor de hertestprocedure in het geval van een dubbel positief of ongeldig testresultaat voor Grp A en Grp B.

11 Gooi gebruikte testdelen weg



Raadpleeg de productbijsluiter voor instructies over het veilig hanteren en verwijderen van monsters en testcomponenten.

<div>Abbott ID NOW Influenza A & B 2</div> <div>QRI, NL</div> <div>Size: 8.5 in x 14 in</div>	<div>Printed Colors</div> <div><div></div><div>CMYK</div></div>	<div>PN: IN427001nl Rev: 7</div> <div>Date of Last Revision: 7.3 2024/01/05</div>
	<div>Incoming Inspection Colors (For Reference Only)</div> <div>Colors below are not used for printing</div> <div><div></div><div>PMS 2995 U Primary Blue</div><div></div><div>PMS 303 U Dark Blue</div><div></div><div>PMS 297 U Light Blue</div><div></div><div>PMS 185 U Red</div></div>	