

PRØVETAKING og HÅNTERING AV PRØVER

Bruk nylig tatte prøver for optimale testresultater. Utløstrekkelig prøvetaking eller unklig håndtering/lagring/transport av prøver kan gi feilaktige resultater.

Neseprevinne

For å ta en neseprevinne før du prøvinnen forsiktig inn i neseboret med mest synlig drenering eller neseboret som er mest tilstoppet hvis det ikke er noen synlig drenering. Roter prøvinnen forsiktig mens du skyver den inn til du møter motstand ved nesemuslingene (ca. 2 centimeter inn i neseboret). Roter prøvinnen flere ganger mot neseveggene, og fjern den deretter sakte fra neseboret. Puritan™ PurFlo™ Standard Tip Ultra Flocked Swabs og Copan™ Standard Rayon Tip Swabs eger seg ikke til bruk for denne analysen. Du finner

lister over akseptable prøvinner for å ta neseprevinne i produktvedlegget.

Nasofaryngeal prøvinn

For å ta en nasofaryngeal prøve før du prøvinnen forsiktig inn i neseboret med mest synlig drenering eller neseboret som er mest tilstoppet hvis det ikke er noen synlig drenering. For prøvinnen rett bakover uten å vippe hodet på prøvinnen opp eller ned. Nesegangen går parallelt med gulvet, ikke parallelt med neseryggen. Roter prøvinnen forsiktig mens du fører den inn i den anteriore nesegang parallelt med ganen og inn i nesesevlet. Hold den der i noen få sekunder, og roter den sakte mens du trekker den ut.

For riktig prøvetaking skal prøvinnen føres inn en avstand som tilsvare halvparten av avstanden fra nesen til øretuppen. Dette er omtrent halve

lengden av prøvinnen. **IKKE BRUK KRAFT** når du fører inn prøvinnen. Prøvinnen skal bevege seg jevnt med minimal motstand – hvis du møter motstand, trekker du prøvinnen litt tilbake uten å ta den ut av neseboret.

Loft deretter bakenden av prøvinnen, og før den fremover inn i nesesevlet. Puritan™ PurFlo™ Ultra Flocked Swabs-Mini Tip eger seg ikke til bruk for denne analysen. Du finner lister over akseptable prøvinner for å ta nasofaryngeal prøver i produktvedlegget.

Kontaktnummer for teknisk støtte

Du kan få ytterligere informasjon fra distributøren eller ved å kontakte teknisk støtte på:

USA	+1 855 731 2288	ts.scr@abbott.com
Afrika, Russland, SUS	+44 161 483 9032	EMETechSupport@abbott.com
Asia og Stillehavsområdet	+61 7 3363 7711	AP.TechSupport@abbott.com
Canada	+1 800 818 8335	CANproductsupport@abbott.com
Europa og Midøsten	+44 161 483 9032	EMETechSupport@abbott.com
Latin-Amerika	+57 (601) 4824033	LA.TechSupport@abbott.com

© 2023 Abbott. All rights reserved. All trademarks referenced are trademarks of either the Abbott group of companies or their respective owners.

www.globalpointofcare.abbott

www.globalpointofcare.abbott

10 Southgate Road Scarborough, Maine 04074 USA

Abbott Diagnostics Scarborough, Inc.

CE

IVD

!

Only R

QC-TESTING


Ekstern positiv og en steril prøvinn for negativ kontroll skal testes én gang for hver nye forsendelse som mottas, og én gang for hver operatør som ikke har fått opplæring.

For QC-testing velger du «Kjør QC-test» på Hjem-skjermbildet og følger instruksjonene som vises. Du finner ytterligere detaljer under Kjøre en QC-test i brukerhåndboken for ID NOW Instrument.


1 Trykk på Kjør QC-test.



2 Velg Influenza A og B på menyen.

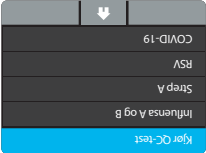


3 Velg QC-testen som skal kjøres.

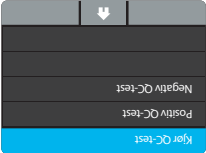

4 Bekreft testen

Bekreft testtypen for QC-prøven som skal testes, ved å trykke på OK og deretter følge instruksjonene på skjermen for å fullføre testingen.

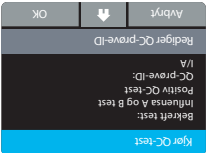

Merk: QC-testen kjøres på samme måte som en direkte pasienttest med neseprevinne.

Se den andre siden for trinnsvis veiledning.

© 2023 Abbott. All rights reserved. All trademarks referenced are trademarks of either the Abbott group of companies or their respective owners.

Software © 2023 Axxin, used under license. All trademarks referenced are trademarks of their respective owners.

IN427001no Rev. 7 2023/12




ID NOW™
INFLUENZA A & B 2
HURTIGVEILEDNING

Materialer som kreves for å kjøre tester:



Instrument:

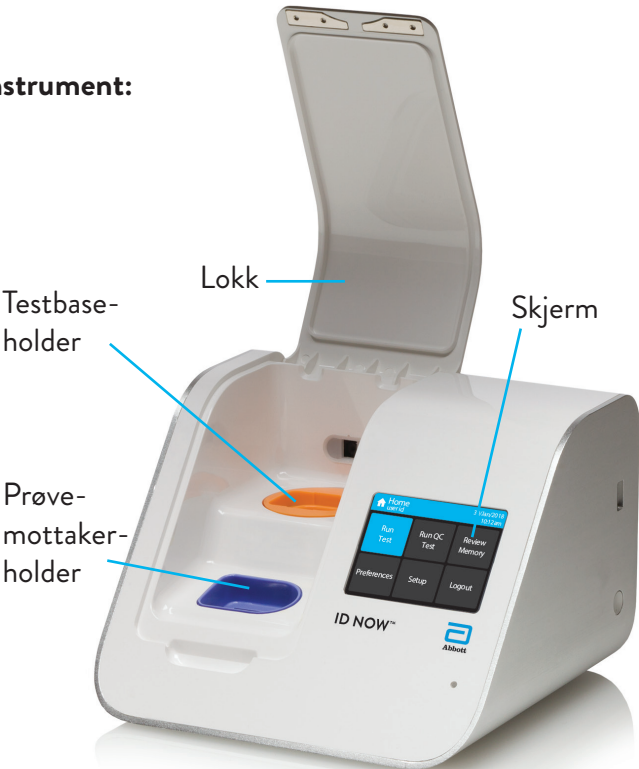

CLIA-kompleksitet: FRITATT

Du finner en fullstendig veiledning i produktvedlegget og brukerhåndboken for ID NOW Influenza A & B 2. Hvis det er behov for en sekvensiell ID NOW COVID-19 2.0-/ID NOW Influenza A & B 2-test med samme prøvemottaker, finner du en fullstendig veiledning i produktvedlegget for ID NOW COVID-19 2.0.

ID NOW™ INFLUENZA A & B 2 HURTIGVEILEDNING

Skann for å se en
ID NOW-
veiledningsvideo.



www.globalpointofcare.abbott/en/support/product-installation-training/id-now-training-videos.html


Før du utfører denne testen, må du se den fullstendige testprosedyren og tilleggsinformasjonen i produktvedlegget og brukerhåndboken for ID NOW Influenza A & B 2. **Merk:** For høyest mulig testkvalitet, se **QC-testing**-delen på baksiden.

Følg instruksjonene nedenfor for å utføre en pasienttest.

1 Ta på rene hansker




2 Slik utfører du en test

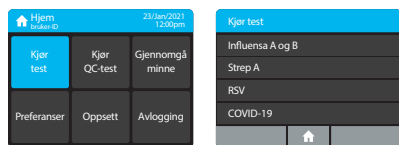

- Trykk på **Kjør test**
- Velg **Influenza A og B**
- Følg deretter instruksjonene **PÅ SKJERMEN**

3 Sett inn testbasen

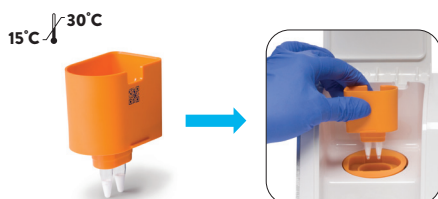


4 Sett inn prøvemottakeren



IKKE FJERN folieforseglingen før du får beskjed etter 3 minutters oppvarming.

5

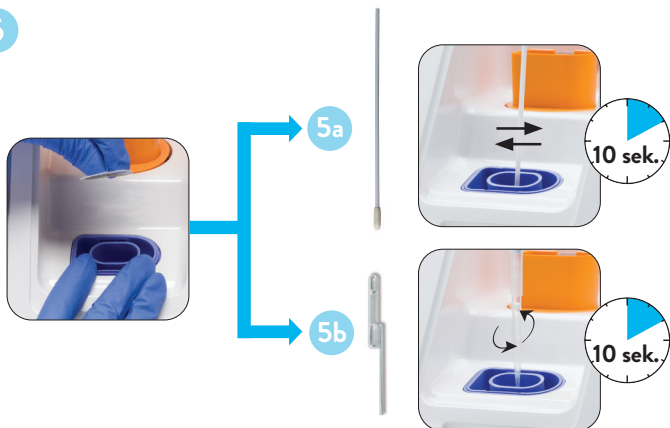


6 Trykk den hvite overføringskassetten inn i den blå prøvemottakeren



- 1. Trykk den hvite overføringskassetten **BESTEMT** inn i den blå prøvemottakeren.
- 2. Lytt etter et eller flere **KLIKK**.
- 3. Kontroller at den oransje indikatoren har beveget seg **HELT** opp til toppen av kassetten.

7 Løft og trykk overføringskassetten inn i testbasen

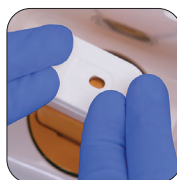

VIKTIG!

- 1. Trykk **BESTEMT** ned med **BEGGE HENDER**.
- 2. Lytt etter **FLERE KLIKK**.
- 3. Kontroller at den oransje indikatoren er **HELT NEDE** før du fortsetter.

8 KONTROLL: Sjekk at den oransje indikatoren er helt nede



Hvis ikke trykker du ned igjen.







Merk: Hvis du ikke trykker helt ned, kan det føre til et **UGYLDIG** eller **URIKTIG** testresultat.

9 Lukk lokket for å starte testen



10 Avlesing av resultatene

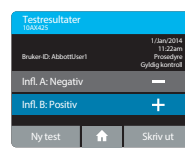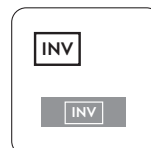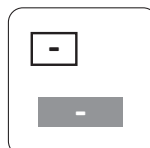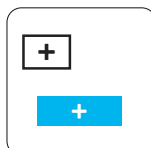



Du finner prosedyren for ny test i veiledningen i produktvedlegget hvis testresultatet er positivt for både influensa A og influensa B eller ugyldig.

11 Kasser de brukte prøvedelene



Du finner instruksjoner om sikker håndtering og kassering av prøver og testkomponenter i produktvedlegget.

<p>Abbott ID NOW Influenza A & B 2</p>	<p>Printed Colors</p>  <p>CMYK</p>	<p>PN: IN427001no Rev: 7</p>
<p>QRI, NO</p>	<p>Incoming Inspection Colors (For Reference Only) Colors below are not used for printing</p>  <p>PMS 2995 U Primary Blue</p> <p>PMS 303 U Dark Blue</p> <p>PMS 297 U Light Blue</p> <p>PMS 185 U Red</p>	<p>Date of Last Revision: 7.4 2023/12/22</p>
<p>Size: 8.5 in x 14 in</p>		