


Consulte o Manual do Utilizador e o Folheto informativo do produto ID NOW Influenza A & B 2 para obter instruções completas. Se pretender fazer um teste sequencial ID NOW COVID-19 2.0 / ID NOW Influenza A & B 2 utilizando o mesmo recetor de amostra, consulte o Folheto informativo do produto ID NOW COVID-19 2.0 para obter instruções completas.

ID NOW™

INFLUENZA A & B 2

INSTRUÇÕES DE REFERÊNCIA RÁPIDA

Efetue a leitura do código para ver o vídeo do procedimento do teste ID NOW.



www.globalpointofcare.abbott/en/support/product-installation-training/id-now-training-videos.html

Antes de realizar este teste, consulte o Manual do Utilizador e o Folheto informativo do produto ID NOW Influenza A & B 2 para obter o procedimento de teste completo e informações adicionais. **Nota:** para realizar um teste de qualidade, consulte a secção **Teste de CQ** no verso.

Para realizar um teste de paciente, siga as instruções seguintes.

1 Calce um par de luvas limpas.




2 Para realizar um teste:



- Prima **Executar teste**.
- Selecione **Gripe A e B**.
- Em seguida, siga as instruções **NO ECRÃ**.

3 Insira a base de teste.

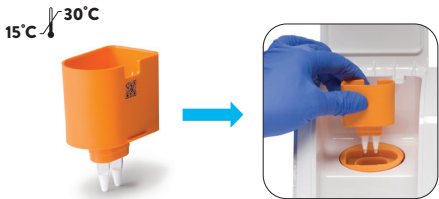


4 Insira o recetor da amostra.



NÃO REMOVA o selo de alumínio até ser instruído para o fazer, após 3 minutos de aquecimento.

5

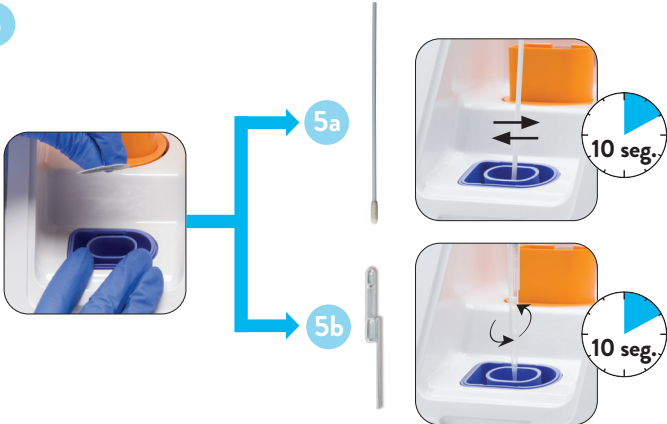


6 Insira o cartucho de transferência branco no recetor de amostra azul.



- 1. Insira **FIRMEMENTE** o cartucho de transferência branco no recetor de amostra azul.
- 2. Deve ouvir um ou mais **CLIQUEs**.
- 3. Confirme se o indicador laranja subiu **TOTALMENTE** até ao topo do cartucho.

7 Levante e insira o cartucho de transferência na base de teste.

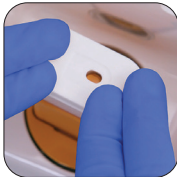

! IMPORTANT!

- 1. Prima **FIRMEMENTE** com **AMBAS AS MÃOS**.
- 2. Ouça os **MÚLTIPLOS CLIQUES**.
- 3. Confirme se o indicador laranja está **TOTALMENTE PREMIDO** antes de continuar.

8 **VERIFIQUE:** certifique-se de que o indicador laranja está totalmente premido.



Caso contrário, **prima-o novamente**.







Nota: se não o premir totalmente pode causar um resultado de teste **INVÁLIDO** ou **FALSO**.

9 Feche a tampa para iniciar o teste.



10 Leia os resultados.

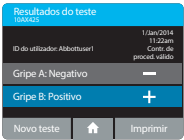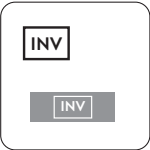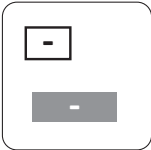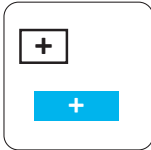






Consulte as instruções do Folheto informativo do produto para obter informações sobre o procedimento de novo teste, se o resultado do teste positivo para a gripe A e gripe B ou inválido.

11 Elimine as peças de teste utilizadas.



Consulte o Folheto informativo do produto para obter instruções sobre o manuseamento e a eliminação seguros de amostras e componentes do teste.

| | | |
|---|---|---|
| <div>Abbott ID NOW Influenza A & B 2</div> <div>QRI, PT</div> <div>Size: 8.5 in x 14 in</div> | <div>Printed Colors</div> <div><div></div><div>CMYK</div></div> | <div>PN: IN427001pt Rev: 7</div> <div>Date of Last Revision: 7.2 2023/12/28</div> |
| | <div>Incoming Inspection Colors (For Reference Only)</div> <div>Colors below are not used for printing</div> <div><div></div><div>PMS 2995 U Primary Blue</div><div></div><div>PMS 303 U Dark Blue</div><div></div><div>PMS 297 U Light Blue</div><div></div><div>PMS 185 U Red</div></div> | |