



# ID NOW<sup>™</sup> INFLUENZA A & B 2 SNABBINSTRUKTIONER

## Material som krävs för att köra ett test:



Testbas



Provmottagare




Överföringskassett



Näsprov

## Instrument:

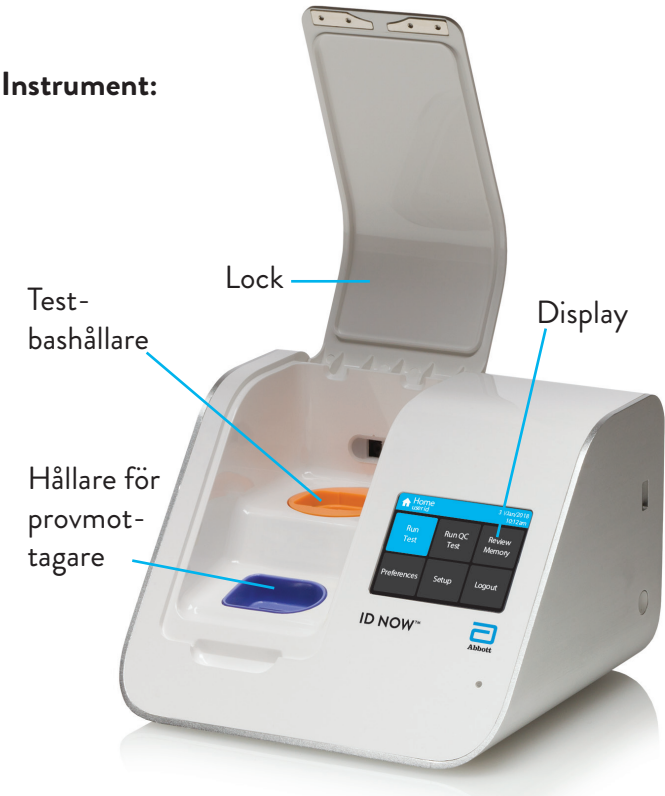

## CLIA-komplexitet: UNDANTAGET

Fullständiga instruktioner finns i bipacksedeln och användarhandboken till ID NOW Influenza A & B 2. Om ett sekventiellt ID NOW COVID-19 2.0/ID NOW Influenza A & B 2-test med samma provmottagare önskas finns fullständiga instruktioner i bipacksedeln till ID NOW COVID-19 2.0.

## PROVTAGNING OCH PROVHANTERING

Använd nytagna prover för bästa testresultat. Otillräcklig provtagning eller felaktig hantering/förvaring/transport av prover kan ge felaktiga resultat.

### Näspröv

Ta ett näspröv genom att försiktigt föra in provpinnen i näsborren med mest synlig rinnsnuva eller den näsborre som är mest täppt om ingen rinnsnuva syns. För in provpinnen samtidigt som du roterar den försiktigt tills du känner motstånd i höjd med näsmusslorna (mindre än 2,5 cm in i näsborren). Roter

provpinnen flera gånger mot näsvägen och dra sedan långsamt ut den ur näsborren. Puritan<sup>™</sup> "PurFlo<sup>™</sup>" ultraflockade provpinnar med standardsspets och Copan<sup>™</sup> standardprovpinnar med viskospets är inte lämpliga för den här analysen. Listor med godtagbara provpinnar för näsprövtagning finns i bipacksedeln.

### Nasofarynxprov

Ta ett nasofarynxprov genom att försiktigt föra in provpinnen i näsborren med mest synlig rinnsnuva eller den näsborre som är mest täppt om ingen rinnsnuva syns. För provpinnen rakt bakåt utan att luta pinnen uppåt eller nedåt. Näsgången går parallellt med golvet, inte parallellt med näsryggen. För in provpinnen i den främre näsöppningen parallellt med gommen medan du roterar den försiktigt, in i nasofarynx, vänta några sekunder och rotera sedan försiktigt provpinnen medan du drar ut den igen.

För korrekt provtagning ska provpinnen föras in så långt så att den är halvägs från näsan till orsnibben. Detta är ungefär halva provpinnens längd. **ANVÄND INTE KRAFT** när du för in provpinnen. Provpinnen ska röra sig lätt med minimalt motstånd. Om motstånd uppstår drar du ut provpinnen lite men utan att dra ut den ur näsborren. Lyft sedan upp den bakre änden av provpinnen och för den framåt in i nasofarynx. Puritan<sup>™</sup> "PurFlo<sup>™</sup>" ultraflockade provpinnar med minispets är inte lämpliga för den här analysen. Listor med godtagbara provpinnar för nasofarynxprovtagning finns i bipacksedeln.

## Rådgivning via teknisk support

Be din distributör om mer information eller kontakta teknisk support på:

**USA**  
+1 855 731 2288  
ts.scr@abbott.com  
EME.TechSupport@abbott.com


**Afrika, Ryssland, OSS**  
+44 161 483 9032  
EME.TechSupport@abbott.com

**Asien och Stillahavsområdet**  
+61 7 3363 7711  
AP.TechSupport@abbott.com


**Kanada**  
+1 800 818 8335  
CANproductsupport@abbott.com

**Europa och Mellanöstern**  
+44 161 483 9032  
EME.TechSupport@abbott.com


**Latinamerika**  
+57 (601) 4824033  
LA.TechSupport@abbott.com



**Abbott Diagnostics Scarborough, Inc.**  
10 Southgate Road  
Scarborough, Maine 04074 USA  
www.globalpointofcare.abbott



**IVD**  
www.globalpointofcare.abbott



**RoHS**


## KVALITETSKONTROLLTESTNING

Extern positiv kontroll och en steril provpinne för negativ kontroll ska testas en gång med varje ny försändelse som mottas och en gång för varje utbildad operatör.  
För kvalitetskontrolltestning väljer du Kör kvalitetest på Hem-skärmen och följer instruktionerna som visas. Mer information finns i Köra ett kvalitetskontrolltest i användarmanualen till ID NOW Instrument.


### 1 Tryck på Kör kvalitetest.




### 2 Välj Influenta A och B på meny.

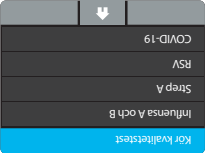

### 3 Välj det kvalitetkontrolltest som ska köras.

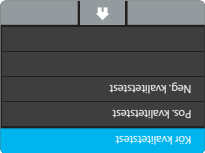

### 4 Bekräfta testet

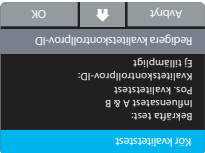

Bekräfta att testtypen överensstämmer med kvalitetskontrollprovet som ska testas genom att trycka på **OK** och följa anvisningarna på skärmen för att genomföra testet.

**Obs!** Kvalitetskontrolltestet körs på samma sätt som ett patienttest med direkt näspröv.

Steg-för-steg-anvisningar finns på andra sidan.

© 2023 Abbott. All rights reserved. All trademarks referenced are trademarks of either the Abbott group of companies or their respective owners.

Software © 2023 Axxin, used under license. All trademarks referenced are trademarks of their respective owners.

IN427001sv Rev. 7 2023/12

# ID NOW™ INFLUENZA A & B 2 SNABBINSTRUKTIONER

Skanna för att  
titta på ID NOW  
-instruktionsvideon.



[www.globalpointofcare.abbott/en/support/product-installation-training/id-now-training-videos.html](http://www.globalpointofcare.abbott/en/support/product-installation-training/id-now-training-videos.html)

Innan du utför testet ska du läsa bipacksedeln och användarhandboken till ID NOW Influenza A & B 2 för fullständig testprocedur och ytterligare information. **Obs!** Information om att utföra ett kvalitetskontrolltest finns i avsnittet **Kvalitetskontrolltestning på baksidan**.

Följ anvisningarna nedan för att utföra ett patienttest.

## 1 Tag på dig ett par rena handskar




## 2 Utföra ett test



- Tryck på **Kör test**
- Välj **Influenza A & B**
- Följ sedan anvisningarna **PÅ SKÄRMEN**

## 3 Sätt in testbasen

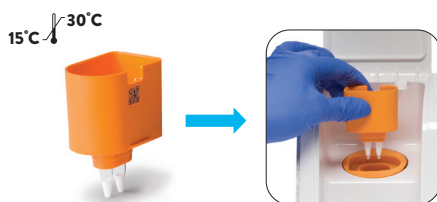


## 4 Sätt in provmottagaren



**TA INTE BORT** folieförseglingen förrän du får instruktioner om det efter 3 minuters uppvärmning.

## 5

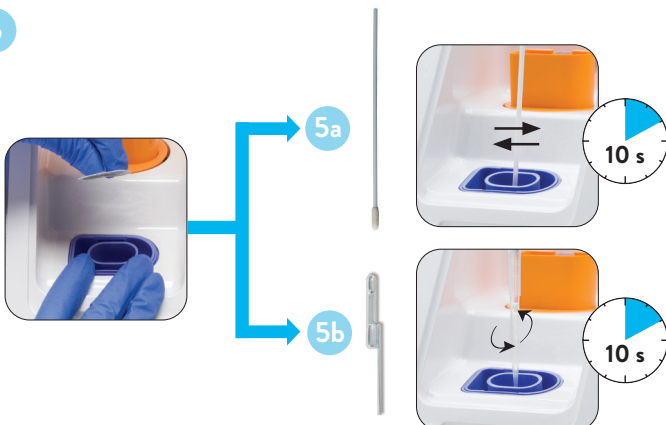


## 6 Tryck fast den vita överföringskassetten i den blå provmottagaren



- 1. Tryck fast den vita överföringskassetten **ORDENTLIGT** i den blå provmottagaren.
- 2. Lyssna efter **KLICK**.
- 3. Bekräfta att den orange indikatorn åkt upp **HELT** till kassettsens överkant.

## 7 Lyft upp överföringskassetten och tryck fast den i testbasen

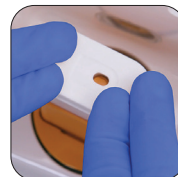

- 1. Tryck ner **ORDENTLIGT** med **BÅDA HÄNDERNA**.
- 2. Lyssna efter **FLERA KLICK**.
- 3. Bekräfta att den orange indikatorn är **HELT NERE** innan du fortsätter.

## 8 KONTROLLERA: Kontrollera att den orange indikatorn är helt nere



Om inte, **tryck ner igen**.







**Obs!** Om du inte trycker ner den helt kan det orsaka ett **OGILTIGT** eller **FALSKT** testresultat.

## 9 Stäng locket för att starta testet



## 10 Läs resultaten

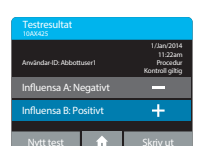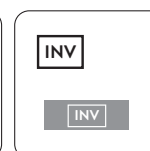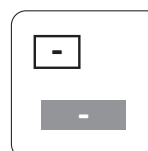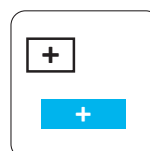






Se instruktionerna i bipacksedeln för omtestproceduren vid dubbelt positivt testresultat för influensa A och influensa B eller ogiltigt testresultat.

## 11 Kassera använda testdelar



Se bipacksedeln för instruktioner om säker hantering och kassering av prover och testkomponenter.

<div>Abbott ID NOW Influenza A &amp; B 2</div> <div>QR,SV</div> <div>Size: 8.5 in x 14 in</div>	<div>Printed Colors</div> <div><div></div><div>CMYK</div></div>	<div>PN: IN427001sv Rev: 7</div> <div>Date of Last Revision: 7.3 2023/12/22</div>
	<div>Incoming Inspection Colors (For Reference Only)</div> <div>Colors below are not used for printing</div> <div><div></div><div>PMS 2995 U Primary Blue</div><div></div><div>PMS 303 U Dark Blue</div><div></div><div>PMS 297 U Light Blue</div><div></div><div>PMS 185 U Red</div></div>	