



ID NOW™

INFLUENZA A & B 2

快速參考說明

執行檢測所需材料：



儀器：



CLIA 複雜性：已豁免

請參閱 ID NOW Influenza A & B 2 《產品說明書》和《使用者手冊》，以了解完整說明。如果需要使用相同的檢體接收槽進行連續 ID NOW COVID-19 2.0 / ID NOW Influenza A & B 2 檢測，請參閱 ID NOW COVID-19 2.0 《產品說明書》，以了解完整說明。


QC 檢測

收到每批新貨物，以及針對每個未經訓練的操作員，都應該進行一次外部陽性和陰性對照的無菌拭子檢測。


對於 QC 檢測，請選取主畫面上的 Run QC Test [執行 QC 檢測]，然後按照顯示的說明進行操作。如需更多詳細資訊，請參閱《ID NOW Instrument 使用者手冊》中的執行 QC 檢測。




1 按下 Run QC Test [執行 QC 檢測]。

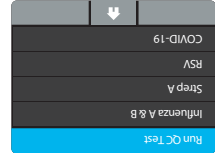

2 從功能表中選取 Influenza A & B [A 型和 B 型流感]。

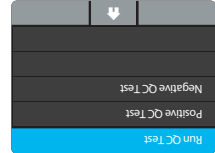

3 選取要執行的 QC 檢測。

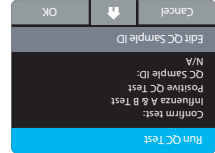

4 確認檢測

透過按下 OK [確定]，確認檢測類型與用於檢測的 QC 檢體相符，並按照畫面提示完成檢測。

註：QC 檢測的執行方式與直接鼻拭子患者檢測相同。請參閱另一面的逐步說明。

© 2024 Abbott. All rights reserved. All trademarks referenced are trademarks of either the Abbott group of companies or their respective owners.

Software © 2023 Axxin, used under license. All trademarks referenced are trademarks of their respective owners.

IN427001htw Rev. 7 2024/01

鼻咽拭子

若要採集鼻咽拭子檢體，請小心地將拭子插入有最明顯分泌物的鼻孔，或者如果看不到分泌物，則插入鼻塞最嚴重的鼻孔。輕輕旋轉，將拭子推入至遇到阻力的位置，也就是鼻孔的位置（距鼻孔不到一英吋）。將拭子抵住鼻壁旋轉數次，然後慢慢從鼻孔取出。Puritan™ Puriflock™ Standard Tip Ultra Flocked Swabs 與 Copan™ Standard Rayon Tip Swabs 不適合在本測定中使用。請參閱《產品說明書》，以了解可接受的鼻拭子採集拭子清單。

檢體採集和處理

使用新鮮採集的檢體以獲得最佳檢測效能。檢體採集不足或檢體處理 / 儲存 / 運輸不當可能會產生錯誤的結果。

技術支援諮詢熱線

您可以從經銷商處獲得更多資訊，或聯絡技術支援：

美國 +1 855 731 2288 ts.scr@abbott.com
非洲、俄羅斯、獨立國家國協 +44 161 483 9032 EME.TechSupport@abbott.com
亞太地區 +61 7 3363 7711 AP.TechSupport@abbott.com
加拿大 +1 800 818 8335 CANproductsupport@abbott.com
歐洲和中東 +44 161 483 9032 EME.TechSupport@abbott.com
拉丁美洲 +57 (601) 4824033 LA.TechSupport@abbott.com

Abbott Diagnostics Scarborough, Inc.
10 Southgate Road
Scarborough, Maine 04074 USA
www.globalpointofcare.abbott



Ro Only

ID NOW™
INFLUENZA A & B 2
快速參考說明

掃描即可觀看
ID NOW 如何
操作影片。



www.globalpointofcare.abbott/en/support/product-installation-training/id-now-training-videos.html


執行此檢測前，請參閱 ID NOW Influenza A & B 2 《產品說明書》和《使用者手冊》，以了解完整檢測程序和其他資訊。
註：若要執行品質檢測，請參閱背面的 QC 檢測一節。

若要進行患者檢測，請按照以下說明操作。

1 戴上一雙乾淨的手套




2 執行檢測

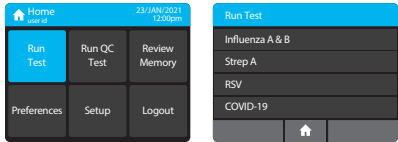

- 按下 Run Test [執行檢測]
- 選取 Influenza A & B [A 型和 B 型流感]
- 然後依照畫面上的說明操作

3 插入檢測底座

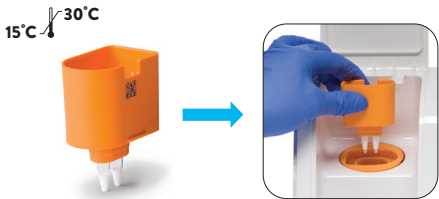


4 插入檢體接收槽



在預熱 3 分鐘後收到指示之前，請勿拆下鋁箔封片。

5

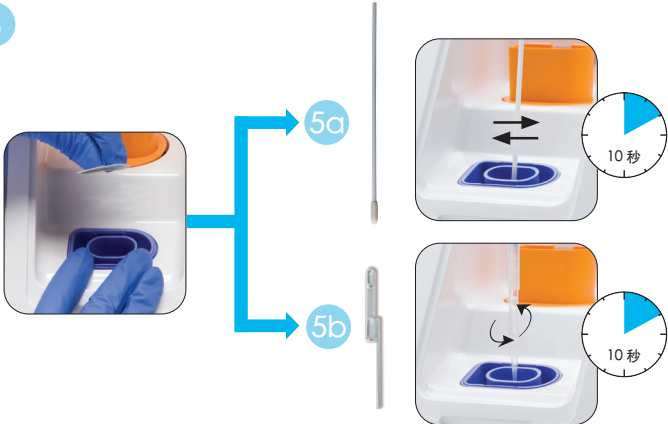


6 將白色傳輸匣按入藍色檢體接收槽中



- 1. 將白色傳輸匣緊緊壓入藍色檢體接收槽中。
- 2. 注意聽咔噠聲。
- 3. 確認橘色指示器已完全上升至傳輸匣頂部。

7 將傳輸匣提起並按入檢測底座

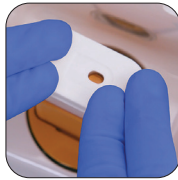

請注意！

- 1. 用雙手用力按下。
- 2. 注意聽多次咔噠聲。
- 3. 繼續前，請先確認橘色指示器已完全降下。

8 查看：確保橘色指示器已完全降下




如果沒有，請再按下。







註：未能完全按下可能會導致無效或偽檢測結果。

9 蓋上蓋子開始檢測

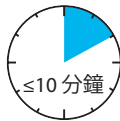


10 讀取結果

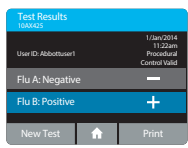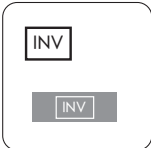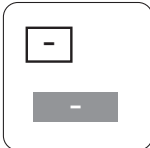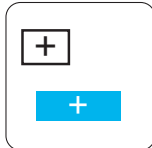

如果雙流感 A 和流感 B 檢測結果呈陽性或無效，請參閱《產品說明書》，以了解重新檢測程序。

11 丟棄使用過的檢測物件

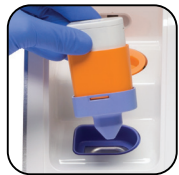

有關安全處理和棄置檢體和檢測組件的說明，請參閱《產品說明書》。

