
[illegible]

- 1 Πιόστε Run QC Test [Εκτέλεση ελέγχου ποιότητας].
- 2 Εμφάνιζε «RSV» από το μενού.
- 3 Εμφάνιζε τον έλεγχο ποιότητας που θέλατε να εκτελέσετε.
- 4 Εμφάνιζαν εξέταση



|  |                   |                               |
|--|-------------------|-------------------------------|
| H.N.A.   | 1 585 731 2288    | ts.scr@abbott.com             |
| Αφίκη, Πωτα και Κοινοποιήτρια Ανεξαρτήτων Κρατών | + 44 161 483 9032 | EMEPproductsupport@abbott.com |
| Ασία-Ειρηνικός                                   | + 61 7 3363 7711  | Aproductsupport@abbott.com    |
| Καναδάς  | + 1 800 818 8335  | CANproductsupport@abbott.com  |
| Ευρώπη και Μέση Ανατολή                          | + 44 161 483 9032 | EMEPproductsupport@abbott.com |
| Λατινική Αμερική                                 | +57 (1) 4824033   | Lapductsupport@abbott.com     |

Πρωτόκολλο της Γενικής Συνέλευσης  
 της Εταιρείας με Αρμόδια Έγκριση  
 των Αποφάσεων της 15ης Ιουλίου 2015

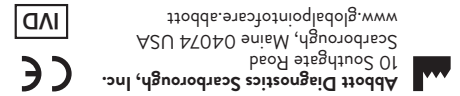

**Υλικά που απαιτούνται για την εκτέλεση της εξέτασης:**



Βάση  
εξέτασης



Υποδοχέας  
δείγματος



Φύσιγγα  
μεταφοράς



Στυλεός  
ρινοφαρυγγικού  
επιχρίσματος



**Όργανο:**

Υποδοχέας  
βάσης  
εξέτασης

Βάση  
στήριξης  
υποδοχέα  
δείγματος

- Καπάκι

Οθόνη

Πριν εκτελέσετε την εξέταση αυτή, ανατρέξτε στο ένθετο προϊόντος και το εγχειρίδιο χρήσης του προσδιορισμού ID NOW RSV για την πλήρη διαδικασία εξέτασης και για περαιτέρω πληροφορίες.

Ακολουθήστε τις εντολές βήμα-βήμα που προβάλλονται στην οθόνη του οργάνου.

1



2

15°C → 30°C



3

15°C → 30°C



4






4α



4β







5

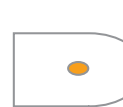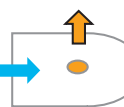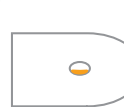

6




7

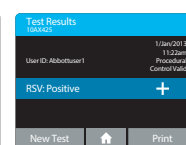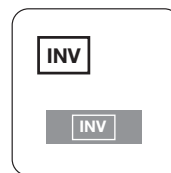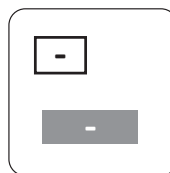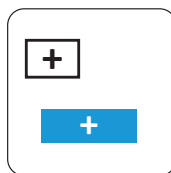



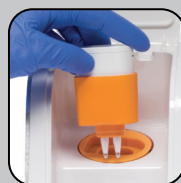

Ανατρέξτε στις οδηγίες του ένθετου προϊόντος για τη διαδικασία επανεξέτασης άκυρου αποτελέσματος.

8



Ανατρέξτε στο ένθετο προϊόντος για οδηγίες σχετικά με τον ασφαλή χειρισμό και την απόρριψη των δειγμάτων και των εξαρτημάτων της εξέτασης.

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Abbott</b><br>ID NOW RSV<br><br>QRI, EL<br><br><b>Size:</b><br>8.5 in. x 11 in. | <b>Printed Colors</b><br><br>CMYK  | <b>PN:</b> IN435001el<br><b>Rev:</b> 6<br><br><b>Date of Last Revision:</b><br>6.2 2020/09/02 |
|  | <b>Incoming Inspection Colors<br/>(For Reference Only)</b><br>Colors below are not used for printing<br> PMS 2995 U<br>Primary Blue<br> PMS 303 U<br>Dark Blue<br> PMS 324 U<br>Mint |   |