




Abbott

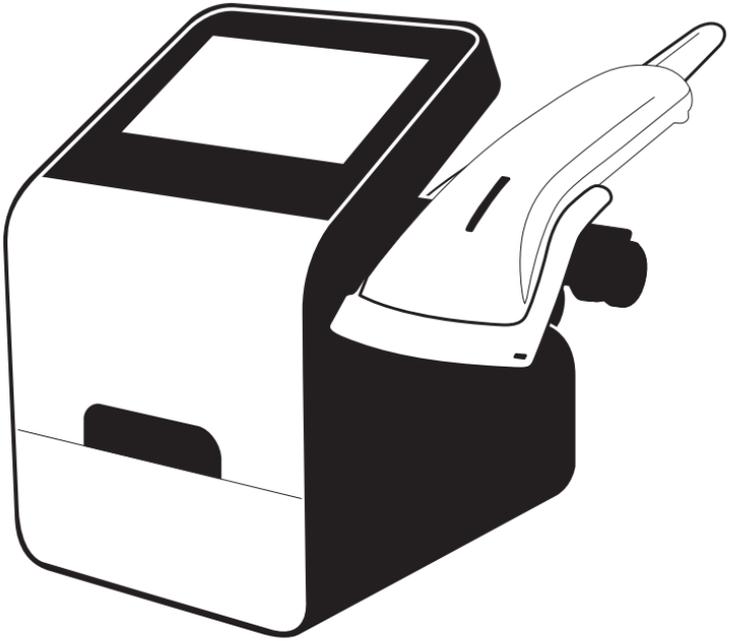

DIGIVAL[™]

GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE



Contenu

REF LFR-000

REF LFR-024



DIGIVAL™

REF L22XWU1-200



Lecteur de codes-barres et étui



Support pour lecteur de codes-barres



Alimentation secteur

REF INLFR000

REF INLFR024



Manuel d'utilisation

REF LFR-003



Paquet de cartes de contrôle de l'étalonnage

Contenu

REF LFR-004



Paquet DIGIVAL™ Tray 1

Accessoires facultatifs

REF MCP1810395



Imprimante

REF EQ004003



Clé USB Abbott

Déballer la boîte d'expédition et vérifier si des dommages visibles sont présents.

Installation du lecteur DIGIVAL™

Placer le lecteur DIGIVAL sur une surface plane à proximité d'une alimentation secteur.



- 1 Trous pour l'installation du support pour lecteur de codes-barres
- 2 Port USB (x1)
- 3 Raccordement électrique
- 4 Ethernet
- 5 Ports USB (x2)



Assemblage de l'étui du lecteur de codes-barres



Raccorder le support à l'arrière du lecteur DIGIVAL. Brancher le lecteur de codes-barres sur le port USB et le placer dans l'étui.



Brancher l'alimentation secteur et allumer le lecteur DIGIVAL.



Ouvrir le tiroir, retirer le plateau et placer la carte de contrôle de l'étalonnage en position, tel qu'illustré sur l'écran.




Saisir le mot de passe admin.

Saisir « admin ».



Régler la date.

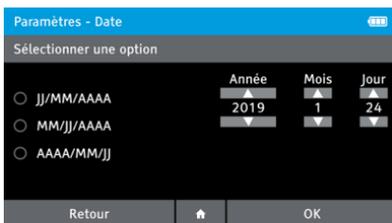

Régler l'heure.



Contrôler l'étalonnage de l'instrument.



Commande et contact

REF LFR-000 : DIGIVAL - OUS

 +1 321 441 7200

REF LFR-024 : DIGIVAL - US

 +1 877 441 7440

Support technique

États-Unis

+1 888 735 5317

ts.scr@abbott.com

Afrique, Russie et CEI

+44 161 483 9032

EME.TechSupport@abbott.com

Asie-Pacifique

+61 7 3363 7711

AP.TechSupport@abbott.com

Canada

+1 800 818 8335

CANproductsupport@abbott.com

Europe et Moyen-Orient

+44 161 483 9032

EME.TechSupport@abbott.com

Amérique latine

+57 601 482 4033

LA.TechSupport@abbott.com



Abbott



Abbott Diagnostics Scarborough, Inc.

10 Southgate Road
Scarborough, Maine 04074 USA
www.globalpointofcare.abbott



www.globalpointofcare.eifu.abbott



© 2024 Abbott. All rights reserved.

All trademarks referenced are trademarks of either the Abbott group of companies or their respective owners.

INLFR009fr Rev. 7 2024/03

Abbott
DIGIVAL

QSG, FR

Size:
5.25 in x 8.5 in

Printed Colors



CMYK

**Incoming Inspection Colors
(For Reference Only)**

Colors below are not used for printing



PMS 2995 U
Primary Blue

PMS 303 U
Dark Blue

PN: INLFR009fr
Rev: 7

Date of Last Revision:
7.3 2024/03/18