




AFINION™ HbA1c 快速參考指南

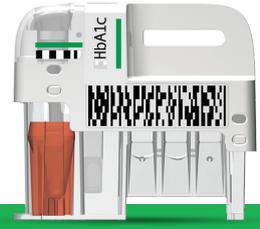

準備分析

AFINION™ HbA1c 檢測匣

- 將檢測組冷藏存放 (2-8°C) 至保存期限為止，或在室溫下存放 (15-25°C) 最多 90 天。
- 使用前，檢測匣的溫度必須達到 18-30°C；將未打開的鋁箔袋放在工作台上至少 15 分鐘。
- 打開鋁箔袋後，在 10 分鐘內使用檢測匣。
- 握住檢測匣的手柄。

病患檢體

- 直接從手指採微血管血液，或靜脈全血（含 EDTA、肝素、檸檬酸鹽或 NaF）。
- 含抗凝劑（NaF 除外）的靜脈全血可以冷藏存放 (2-8°C) 10 天或在室溫下存放 (18-30°C) 8 小時。無法保存毛細管檢體。
- 使用前將試管倒置 8-10 次，以混合檢體。

AFINION™ HbA1c Control

- 將品管組冷藏存放 (2-8°C)。已打開的品管組可保持穩定 60 天。
- 使用前將品管組恢復到 15-25°C，大約需時 45 分鐘。
- 使用前搖動試劑 30 秒，以充分混勻品管試劑。可以使用旋渦混合器。
- 測量值應在 AFINION™ HbA1c Control 使用說明書中規定的可接受範圍以內。

AFINION™ 2 分析儀

- 打開分析儀並輸入操作者 ID。
- 按照背面的檢測程序分析病患檢體及品管組。
- 分析過程中可能顯示資訊代碼。
AFINION™ 2 分析儀使用手冊中列出可能原因及需要採取的措施。



AFINION™ HbA1c 檢測專用
資訊代碼：


代碼	原因
103	血紅素低於 6.0 g/dL
104	血紅素高於 20.0 g/dL
105	HbA1c 低於測量範圍
106	HbA1c 高於測量範圍




查閱 AFINION™ 使用說明獲取完整資訊：

- AFINION HbA1c 使用說明書。
- AFINION HbA1c Control 使用說明書。
- AFINION 2 分析儀使用手冊。


檢測程序

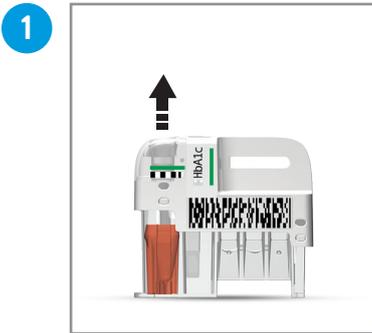

從檢測匣中拉出檢體採集裝置。

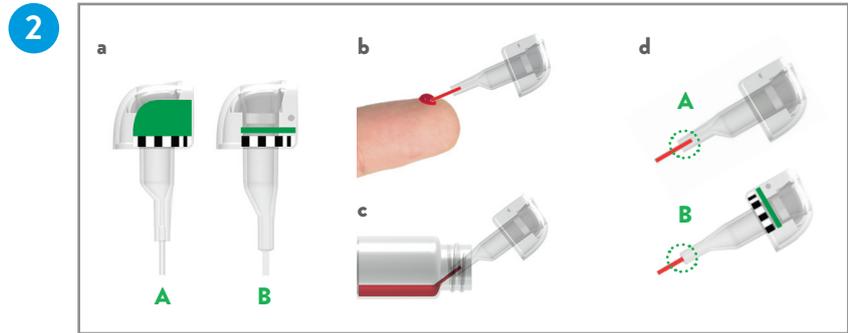


Afinion HbA1c 檢測匣配有兩種型號 (A 或 B) 的檢體採集裝置 (a)。這兩種型號的形狀略有不同，但毛細管的填充量與裝置的操作完全相同。用病患檢體 (b) 或品管試劑 (c) 完全填滿毛細管 (d)。

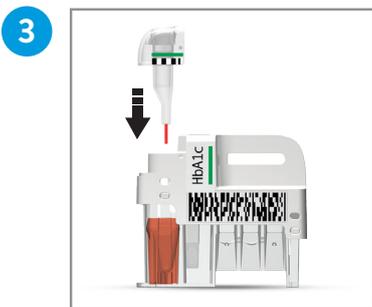

立即將檢體採集裝置放入檢測匣。必須在 2-3 分鐘內開始分析檢測匣。



點選 查看病患檢體，或點選 查看質控品。蓋子自動打開。

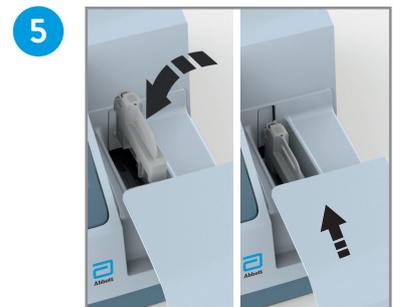

插入檢測匣，條碼朝左。手動關上蓋子，開始分析。



點選 並輸入病患 ID，或點選 並輸入品管組 ID。點選 以確認。



記錄顯示幕中顯示的結果。點選 以接受。蓋子自動打開。



取出用過的檢測匣並立刻將其丟棄。不使用分析儀時手動關上蓋子。