



BinaxNOW™

STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE

Abbott

ANTIGEN CARD

Menettelykortti

Testi on tarkoitettu luettavaksi vain yhdellä menetelmällä; joko DIGIVAL™ -lukijalla **TAI** visuaalisesti ikkunasta. Lue kaikki tiedot BinaxNOW Streptococcus pneumoniae -tuoteselosteesta. Tee vaihe 1 ennen testin suorittamista, jos käytät DIGIVAL -lukijaa. Jos et käytä DIGIVAL -lukijaa, siirry suoraan vaiheeseen 2.

Vaihe 1 – DIGIVAL™ -lukijan käyttöönotto (tarvittaessa)

Saat DIGIVAL -lukijan tarkat asetusohjeet käyttöoppaasta.



1 KÄYNNISTÄ DIGIVAL™

Paina laitteen etuosassa olevaa virtapainiketta.



2 ANNA KÄYTTÄJÄTUNNUS JA SALASANA

Paina tietojen antamisen jälkeen "OK".

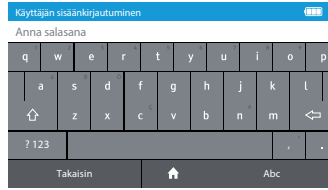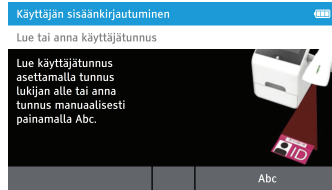


3 VALITSE LUE TESTI

Tämä aloittaa lukuprosessin.




4 ANNA TESTILAITTEEN TUNNUS

Lue testilaitteen tunnus asettamalla testilaitteen foliopussin viivakoodi skannauslaitteen alle tai kirjoita tunnus käsin.

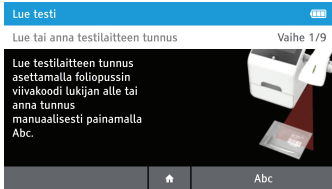


5 ANNA POTILASTUNNUS

Lue potilastunus laittamalla potilaan viivakooditunnus skannauslaitteen alle tai kirjoita tunnus käsin.

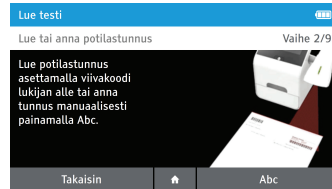

6 VAHVISTA ANNETUT TIEDOT


Varmista, että näytöllä olevat tiedot ovat oikein, ja napauta "OK".

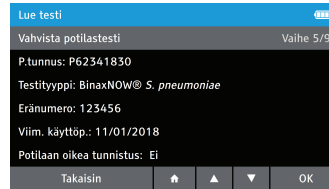

Huomautus: Oletusasetuksena on Vain koehenkilötunus, katso vaihtoehtoiset asetukset DIGIVAL -lukijan käyttöoppaasta.


Vaihe 2 – Testimenettely

1 Poista kortti pussista juuri ennen testausta ja aseta se työpöydälle.

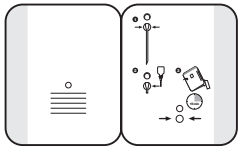


2 Kasta Abbott-puikko virtsa- tai aivo-selkäydinnesteenäytteeseen.


Työnä vanupuikko **ALEMPAAN** reikään (näytekuoppaan). Työnä puikkoa vakaasti ylöspäin niin, että puikon pää näkyy kokonaan yleimmästä aukosta. **ÄLÄ POISTA VANUPUIKKOJA.**

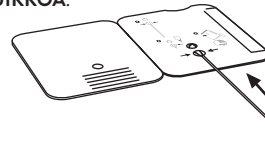

3 Pitele A-reagenssia pystysuorassa noin 1/2–1 tuumaa kortin yläpuolella. Lisää hitaasti kolme (3) vapaasti putoavaa tippaa A-reagenssia **ALEMPAAN** reikään.

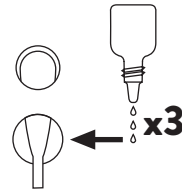


4 Vedä liimapaperi heti irti testikortista. Sulje kortti tiiviisti.

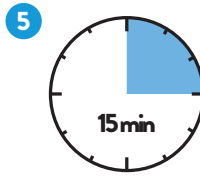

Lue tulos 15 minuutin kuluttua kortin sulkemisesta.

Huomautus: Vanupuikon varsi on kätevyyden vuoksi uurrettu siten, että se voidaan napsauttaa poikki kortin sulkemisen **jälkeen**. Näin kortti mahtuu DIGIVAL -lukijan sisätilineeseen. Varo, ettei puikko siirry pois näytekuopasta, kun katkaiset varren.

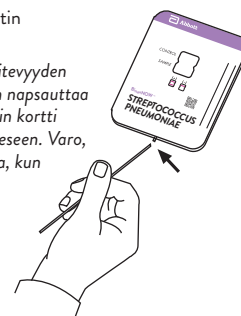

Siirry vaiheeseen 3, jos käytät DIGIVAL™ -lukijaa. Jos luet testin silmämääräisesti, siirry vaiheeseen 4.


Menettelykortti

Vaihe 3 – Tulosten tulkinta – DIGIVAL™ -lukija

DIGIVAL -lukijaa voidaan käyttää kahdessa eri tilassa (itsenäinen tila ja suoralukutila).
Lue DIGIVAL -lukijan tarkat käyttöohjeet käyttöoppaasta.

1a SUORALUKUTILA:


Avaa lukuajankohtana eli 15 minuutin kuluttua vetolaatikko, aseta testilaite siten, että viivakoodi ja tulostentarkistusikkuna osoittavat ylöspäin, ja sulje laatikko. ÄLÄ AVAA VETOLAATIKKOA, ennen kuin testin tulos on ilmestynyt näytölle.

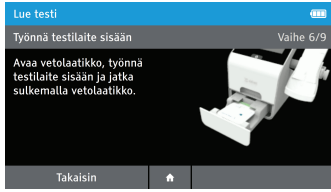

TAI



1b OHITUSTILA:

Kun testilaite on suljettu turvallisesti, avaa DIGIVAL -lukijan vetolaatikko välittömästi, aseta testilaite sisään ja sulje laatikko. DIGIVAL mittaa testausajan ja lukee tuloksen automaattisesti lukuajankohtana.

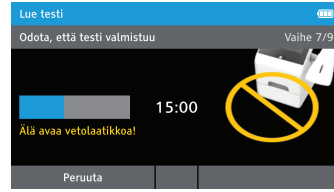

2 LUE TESTITULOKSET

Kun testi on suoritettu, napauta **Tulosta** testitulosten tulostamiseksi.

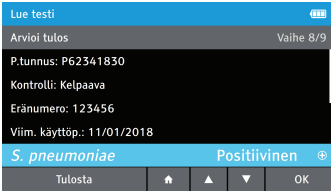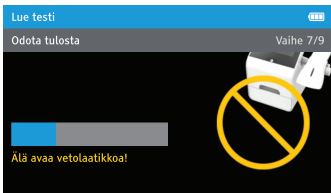

3 HÄVITÄ TESTILAITE

Avaa vetolaatikko, poista testilaite ja sulje vetolaatikko. Aloitusnäyttö avautuu automaattisesti.



**TESTILAITETTA EI SAA
TYÖNTÄÄ TAKAISIN, KUN
TULOS ON ILMOITETTU.**

Vaihe 4 – Vain silmämääräinen tulosten tulkinta (saat vaiheesta 3 lisätietoja tulosten tulkinnasta DIGIVAL™ -lukijalla)

Negatiivinen näyte tuottaa yhden punasävyisen kontrolliviivan ikkunan yläpuoliskoon. Tämä tarkoittaa oletetusti negatiivista tulosta. Kontrolliviiva osoittaa, että testin tunnistusvaihe suoritettiin oikein, mutta näytteestä ei löydetty *S. pneumoniae* -antigeeniä.

Positiivinen näyte tuottaa kaksi punasävyistä viivaa. Tämä tarkoittaa, että näytteestä on löytynyt antigeeni. Näytteet, joissa on hyvin pieni määrä antigeeniä, voivat tuottaa himmeän potilasnäyteviivan. Näkyvä viiva tarkoittaa aina positiivista tulosta.

Jos ikkunassa ei näy yhtään viivaa tai siinä näkyy vain näyteviiva, määrittäminen on epäkelpo. Epäkelvot testit on toistettava. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä Abbott-yhtiön tekniseen tukeen.



Vaaleanpunainen kontrolliviiva



Vaaleanpunainen kontrolliviiva
Vaaleanpunainen näyteviiva



Ei kontrolliviivaa



Vain näyteviiva

<div>Abbott</div> <div>BinaxNOW</div> <div>Streptococcus pneumoniae</div> <div>Antigen Card with DIGIVAL</div> <div>Procedure Card</div> <div>Size:</div> <div>8 in x 11 in</div>	<div>Printed Colors</div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div>CMYK</div>	<div>PN: IN710101fi</div> <div>Rev: 4</div>
	<div>Incoming Inspection Colors</div> <div>(For Reference Only)</div> <div>Colors below are not used for printing</div> <div><div></div><div>PMS 2995 U</div><div>Primary Blue</div></div> <div><div></div><div>PMS 2577 U</div><div>Lavender</div></div> <div><div></div><div>PMS 303 U</div><div>Dark Blue</div></div>	<div>Date of Last Revision:</div> <div>4.3 2019/03/05</div>